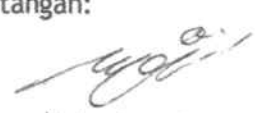
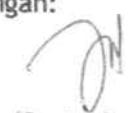


INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM COLD ROOM UNTUK PuF

NO DOKUMEN	:	UDDP-BBFP-L3-005
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Juni 2025
TANGGAL REVIEW	:	20 Juni 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Wahyono, S. Pd Kasie. Penerimaan, Penyimpanan dan Pengiriman UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 16 Juni 2025
Diperiksa oleh: Arfat Lusinanto, S. Si, M. Biomed Kasubid. Bahan Baku fraksionasi Plasma UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 17 Juni 2025
Disetujui oleh: DOKUMEN TERKENDALI Salinan No: 01 dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kabid. Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 18 Juni 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan:  Tanggal: 20 Juni 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM COLD ROOM UNTUK PuF		Halaman 2 dari 5 Nomor : UDDP-BBFP-L3-005 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

1. Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pengepakan plasma untuk pengiriman Plasma Fraksionasi (PuF) ke Fraksionator yang telah ditunjuk oleh pemerintah

2. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini digunakan oleh satu atau lebih tim pengepakan yang terdiri dari dua orang petugas teknis untuk pengepakan per kardus, dan satu orang *time keeper* sebagai pencatat waktu, dengan perbandingan maksimal lima tim pengepakan berbanding satu orang *time keeper*

3. Prosedur yang terkait

Standar Prosedur Operasional pengepakan dan transportasi plasma untuk transportasi

4. Referensi

- 3.1. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma
- 3.2. Perka BPOM No.10 tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plamsaaferesis

5. Peralatan

- 4.1. Komputer set dengan SIMDONDAR versi 3.7
- 4.2. Freezer Room (rentang suhu: -20 ~ -40°C)
- 4.3. Cold room (rentang suhu: 2 ~ 6°C)
- 4.4. Data Logger (rentang suhu: -50 ~ +50°C)
- 4.5. Komputer set dengan sistem SIMDONDAR untuk PuF
- 4.6. Barcode Scanner
- 4.7. Printer barcode
- 4.8. Ice Pack dengan ukuran: p.10,8 x l.13,3 x t.2,1 cm
- 4.9. Spidol besar permanen (7,5mm)
- 4.10. Cool box
- 4.11. Timer
- 4.12. Thermogun (suhu: -20°C ke bawah)

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

6. Bahan

- 5.1. Kantong Plasma untuk PuF
- 5.2. Kardus dengan ukuran: p.56 x l.27 x t.17 cm
- 5.3. Bubble wrap dengan ukuran: p.70 x l.70 cm
- 5.4. Bubble wrap dengan ukuran: p.56 x l.27 cm (penutup permukaan tumpukan plasma)
- 5.5. Kertas Barcode untuk label sampel dan kardus sesuai spesifikasi sistem SIMDONDAR

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM COLD ROOM UNTUK PuF		Halaman 3 dari 5 Nomor : UDDP-BBFP-L3-005 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

5.6. *Ribbon Print Barcode*

5.7. *Selotip bening ukuran sedang (24mm-1 inch-lebar 2cm)*

5.8. *Lakban kain (benang rayon) merk Daimaru dengan ukuran: 48mm x 5 meter (2 inch)*

7. Instruksi Kerja

- 6.1. Pastikan suhu dari *cold room* berada pada rentang 2-6°C
- 6.2. Ambil satu paket plasma yang telah di *scan* beserta label yang telah diprint, lalu bawa ke dalam *cold room*
- 6.3. Petugas *time keeper* mulai mencatat waktu plasma mulai pengepakan
- 6.4. Untuk kardus pertama dan kardus terakhir, ukur suhu plasma pertama yang diletakkan pada tiap kardus menggunakan *thermogun*, lalu catat pada formulir pencatatan suhu dan waktu pengepakan dan transportasi plasma. Lihat formulir pencatatan suhu dan waktu pengepakan dan transportasi plasma (No.dok: UDDP-BBFP-L4-001)
- 6.5. Siapkan *bubble wrap* dan kardus plasma yang telah dikondisikan
- 6.6. Letakkan satu persatu kantong di tengah *bubble wrap*
- 6.7. Susun plasma dalam posisi horizontal/flat (label kantong berada diatas), dengan saling bertumpuk secara zig-zag, dengan posisi diberikan cukup ruang pada bagian selang kantong tidak menyentuh dinding kardus. Pastikan lebar tumpukan plasma tidak melebihi lebar kardus yang akan digunakan
- 6.8. Untuk kardus pertama dan kardus terakhir, masukkan *data logger* di antara tumpukan plasma. Lihat IK Peletakkan *Data Logger* (no.dok: UDDP-BBFP-L3-005)
- 6.9. Bungkus tumpukan plasma dengan melipat *bubble wrap* ke seluruh bagian tumpukan, pastikan tidak ada bagian kantong plasma yang terekspos
- 6.10. Masukkan tumpukan plasma ke dalam kardus mulai dari sisi kiri petugas, lalu lanjutkan peletakkan tumpukan plasma berikutnya sampai kardus terisi penuh. Untuk kantong WB 350 mL dan 450 mL, biasanya satu kardus terisi dengan empat tumpuk plasma
- 6.11. Tutup kardus dengan lakban kain hingga seluruh celah kardus tertutup rapat
- 6.12. Tempelkan sesuai dengan intruksi kerja penempelan QR Kardus dan barcode kantong. Lihat IK Penempelan Label kardus (no.dok: UDDP-BBFP-L3-006)
- 6.13. Jika suhu *cold room* naik sampai 6°C, hentikan proses pengepakan. Tutup pintu *cold room* dan pindahkan plasma yang sedang dikemas ke dalam *freezer room* - 20°C atau dibawahnya
- 6.14. Segera simpan kardus pada *freezer/freezer room* untuk sementara setelah dikemas hingga waktu diangkut ke truk
- 6.15. Agar suhu *freezer* tetap terjaga, masukkan kardus plasma ke dalam *freezer* pada saat yang sama dengan pengeluaran plasma dan kardus berikutnya

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM COLD ROOM UNTUK PuF		Halaman 4 dari 5 Nomor : UDDP-BBFP-L3-005 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	20 Juni 2025	PMK No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma	Dokumen baru

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM COLD ROOM UNTUK PuF		Halaman 5 dari 5 Nomor : UDDP-BBFP-L3-005 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

Lampiran
Penyusunan kantong plasma

