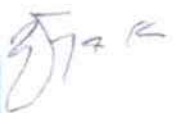


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD

NO DOKUMEN	:	UDDP-IMLTD-L2-003
VERSI	:	003
TANGGAL BERLAKU	:	02 JUNI 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	02 JUNI 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A. Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 19 Mei 2025
Diperiksa oleh : MASTER Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.St. Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 21 Mei 2025
Disetujui oleh : DOKUMEN TERKENDALI Salinan No : 01 dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 26 Mei 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 28 Mei 2025

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 1 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-003 Versi : 002 003 Tanggal berlaku : 02 Jun 2025 Tanggal kaji ulang : 02 Jun 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menjelaskan tahapan kegiatan dalam pemeriksaan uji saring IMLTD baik metode (*Chemiluminescent Linked Immuno Assay*) CLIA dan *Nucleid Acid Test* (NAT)

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh staff Rujukan dan Litbang yang terlibat dalam pemeriksaan uji saring IMLTD baik metode CLIA dan NAT

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Setiap kantong darah yang disumbangkan harus diuji saring terhadap IMLTD dan hanya dikeluarkan jika hasilnya non reaktif

3.2 Butir 7.116

Pengujian wajib dilakukan pada setiap individu yang melakukan donasi, meliputi:

3.2.1 Antigen permukaan Hepatitis B (HbsAg)

3.2.2 Anti HIV 1/ HIV 2

3.2.3 Anti- HCV

3.2.4 Sifilis

Uji tambahan terhadap penyakit lain, yang ditentukan berdasarkan data epidemiologi, dapat dilakukan

3.3 Pemeriksaan uji saring IMLTD dilakukan secara individual tes untuk seluruh parameter uji yang dilakukan

3.4 Jika diinginkan oleh auran yang berlaku atau UTD, uji saring dapat juga meliputi:

3.3.1 NAT untuk HBV

3.3.2 NAT untuk HIV

3.3.3 NAT untuk HCV

3.5 Sampel untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

3.4.1 Sampel berupa darah lengkap/*whole blood* dalam tabung yang akan dipisahkan sebagai serum atau plasma.

3.4.2 Sampel ditampung dalam tabung vakum/tidak vakum yang berukuran 12x75 mm.

3.4.3 Tabung sampel terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan tutup dengan antikoagulan maupun tidak.

3.4.4 Memiliki label berupa *barcode*/etiket yang berisi: tanggal pengambilan, nomor kantong darah dan tempat pengambilan.

3.4.5 Disertai formulir pengiriman sampel darah yang berisi: nomor urut, nomor kantong darah, tanggal pengambilan, asal sampel, diperiksa dan ditandatangani dengan jelas nama petugas pengirim dan petugas yang menerima sampel.

3.4.6 Sampel darah tidak boleh hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin.

3.4.7 Memiliki masa simpan maksimal kurang dari 3 hari pada suhu 2-6°C

3.4.8 Volume spesimen minimal ± 3 mL.

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 2 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-003 Versi : 002 11 003 Tanggal berlaku : 02 Jun 2025 Tanggal kaji ulang : 02 Jun 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 3.6 Peralatan untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan berikut:
- 3.5.1 Memiliki ijin edar dari badan yang berwenang (Kemenkes)
 - 3.5.2 Telah Lulus evaluasi oleh salah satu badan berwenang (Kementerian Kesehatan, WHO, CE Marked, TGA Australia, PEI-Jerman, US-FDA dan UDDP)
 - 3.5.3 Memiliki dokumentasi kualifikasi dan validasi peralatan dari vendor
 - 3.5.4 Memiliki dokumentasi pemeliharaan peralatan secara rutin
 - 3.5.5 Telah dikalibrasi secara berkala dan masa kalibrasi masih berlaku
 - 3.5.6 Divalidasi sebelum digunakan
- 3.7 Reagensia untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan berikut:
- 3.6.1 Bahan dan reagen yang digunakan seharusnya hanya berasal dari pemasok yang telah disetujui
 - 3.6.2 Bahan dan reagen memenuhi persyaratan serta spesifikasi yang ditetapkan
 - 3.6.3 Bahan dan reagen tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan
 - 3.6.4 Memiliki ijin edar dan telah dievaluasi dari badan yang berwenang (EU, CE Marked, ISO, Kemenkes, UDDP)
 - 3.6.5 Memiliki instruksi kerja/leaflet pada setiap reagensia dan kit tes (cek kesesuaian antara insert kit dengan reagen)
 - 3.6.6 Divalidasi sebelum digunakan
- 3.8 Butir 7.117
- Uji terhadap empat paramater hendaklah Non reaktif. Donasi/sampel yang terbukti reaktif pada awal pemeriksaan hendaklah diuji ulang dengan cara duplo menggunakan metode/assay yang sama.
- 3.9 Semua pemeriksaan harus dilakukan menurut instruksi pabrik, SPO dan kriteria penerimaan yang ditetapkan
- 3.10 Pemeriksaan uji saring IMLTD harus dilakukan oleh SDM yang terlatih menggunakan metoda, reagen dan peralatan yang telah divalidasi.
- 3.11 Ruangan yang digunakan untuk uji saring IMLTD harus memenuhi sistem mutu dan hanya boleh dimasuki oleh petugas yang berwenang.
- 3.12 Butir 3.3
- Catatan aktivitas kritis hendaklah dilakukan dua kali pemeriksaan, baik oleh orang kedua maupun secara elektronik.

4. Referensi

- 4.1 PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 CLIA : *Chemiluminescent Linked Immuno Assay*
- 5.2 HBV : Hepatitis B Virus
- 5.3 HCV : Hepatitis C Virus

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 3 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-003 Versi : 002 AA 003 Tanggal berlaku : 02 Jun 2025 Tanggal kaji ulang : 02 Jun 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 5.4 HIV : *Human Immunodeficiency Virus*
- 5.5 IMLTD : Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah.
- 5.6 NAT : *Nucleid Acid Test*
- 5.7 Uji Saring Salah satu tahap di dalam pengelolaan darah yang dilakukan oleh Palang merah Indonesia (PMI) untuk mendapatkan darah yang aman bagi pengguna darah dengan menyaring beberapa penyakit infeksi yang menular lewat transfusi darah

6. Peran Dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung jawab
Manajer Kualitas	- Memberikan nomor register pada formulir dan SPO - Memastikan bahwa inspeksi kegiatan dalam SPO ini termasuk audit internal reguler berjalan baik - Mengesahkan SPO Pemeriksaan Uji Saring IMLTD
Kepala Bidang Pelayanan Darah 	- Menyetujui SPO Pemeriksaan Uji Saring IMLTD - Memastikan pemeriksaan IMLTD dilakukan sesuai dengan prosedur ini
Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang 	- Memeriksa SPO Pemeriksaan Uji Saring IMLTD - Mengawasi proses pemeriksaan uji saring IMLTD. - Menjelaskan SPO ini kepada seluruh staf di sub bidang Rujukan dan Litbang - Periksa pencatatan dan dokumentasi pemeriksaan untuk uji saring IMLTD setiap minggu dan bulannya secara periodik untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah terlaksana dan tercatat. - Periksa dan memastikan bahwa setiap pemeriksaan sesuai dengan SPO Pemeriksaan Uji Saring IMLTD. - Tanda Tangan konfirmasi bahwa telah diperiksa.
Staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang	- Melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai dengan SPO - Melakukan validasi terhadap kegiatan pada pemeriksaan uji saring IMLTD - Melakukan pencatatan dan dokumentasi setiap formulir yang telah ditandatangani dengan lengkap dan disahkan oleh penanggung jawab

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 4 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-003 Versi : 002 <i>12</i> 003 Tanggal berlaku : 02 Jun 2025 Tanggal kaji ulang : 02 Jun 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

Peran	Tanggung jawab
	Menyusun atau mengkaji ulang SPO Pemeriksaan Uji Saring IMLTD

7. Prosedur

7.1 Pemeriksaan Metode Chemiluminescent Linked Immuno Assay (CLIA)

- 7.1.1 Gunakan alat pelindung diri (APD) ketika melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD
- 7.1.2 Pastikan bahwa sampel, peralatan dan reagensia untuk uji saring IMLTD telah dipersiapkan sesuai dengan SPO Persiapan Pemeriksaan Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L2-002)
- 7.1.3 Pastikan bahwa sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan CLIA dengan *Architect i2000SR* (UDDP-IMLTD-L3-001)
- 7.1.4 Pastikan kebutuhan bahan habis pakai cukup untuk pemeriksaan sampel
- 7.1.5 Pastikan setiap langkah pada pemeriksaan telah dicek oleh orang kedua

7.2 Pemeriksaan Nucleic Acid Testing (NAT)

- 7.2.1 Gunakan alat pelindung diri (APD) ketika melakukan pemeriksaan uji saring NAT
- 7.2.2 Pastikan bahwa sampel, peralatan dan reagensia untuk uji saring IMLTD telah dipersiapkan sesuai dengan SPO Persiapan Pemeriksaan Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L2-002)
- 7.2.3 Lakukan pemeriksaan NAT sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan NAT (UDDP-IMLTD-L3-002)
- 7.2.4 Pastikan kebutuhan bahan habis pakai cukup untuk pemeriksaan sampel
- 7.2.5 Pastikan setiap langkah pada pemeriksaan telah dicek oleh orang kedua

7.3 Pembacaan Hasil dan Pencatatan

- 7.3.1 Gunakan alat pelindung diri ketika melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD
- 7.3.2 Pastikan bahwa pemeriksaan uji saring telah dilakukan sesuai dengan instruksi kerja pemeriksaan
- 7.3.3 Pastikan hasil pemeriksaan telah divalidasi sesuai dengan kualifikasi pabrik pada masing-masing parameter
- 7.3.4 Catat dan interpretasikan hasil pemeriksaan sesuai dengan Algoritma Strategi Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L5-001)
- 7.3.5 Pastikan hasil pemeriksaan disahkan oleh Kepala Sub Bidang Rujukan & Litbang sebelum dilakukan interpretasi hasil
- 7.3.6 Pastikan bahwa hasil pemeriksaan dicatat dengan dimasukkan ke dalam SIMDONDAR sesuai dengan *Manual Book SIMDONDAR*
- 7.3.7 Pastikan formulir sampel, lembar kerja pemeriksaan, ceklist dan *print out* diarsipkan dengan rapi pada tempat penyimpanan dokumen setelah semua pemeriksaan diselesaikan
- 7.3.8 Dokumentasi dapat disimpan dalam lemari arsip di laboratorium selama 5 tahun

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 5 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-003 Versi : 002 003 Tanggal berlaku : 02 Jun 2025 Tanggal kaji ulang : 02 Jun 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

7.4 Pelaporan Hasil Uji Saring IMLTD

- 7.4.1 Pastikan setiap kali melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD, hasil pemeriksaan dilaporkan ke bagian distribusi, Formulir Hasil Uji Saring IMLTD Darah Reaktif diulang Duplo dan NAT (UDDP-IMLTD-L4-006)
- 7.4.2 Pastikan sampel darah yang ditemukan reaktif dilakukan pengecekan terhadap kantong darah dan komponennya sesuai dengan SPO Penanganan Darah Reaktif (UDDP-IMLTD-L2-006)
- 7.4.3 Pastikan kantong dan komponen darah yang dicekal dimusnahkan sesuai dengan SPO Penanganan Darah Reaktif (UDDP-IMLTD-L2-006)

7.5 Dokumentasi Sampel Uji Saring IMLTD

- 7.5.1 Lakukan penyimpanan terhadap tabung sampel darah donor selama 1 (satu) minggu pada suhu 2-6°C setelah selesai melakukan pemeriksaan pada setiap sampel darah donor,
- 7.5.2 Simpan pada *refrigerator* yang berlabel "Arsip Sampel darah sudah diperiksa"
- 7.5.3 Beri label tanggal pemeriksaan pada setiap rak
- 7.5.4 Buang tabung darah donor yang disimpan, apabila sudah disimpan 1 (satu) minggu
- 7.5.5 Masukkan ke dalam kantong limbah infeksius (warna kuning) dan serahkan ke petugas pengelola limbah laboratorium UDDP untuk dikumpulkan pada penampung khusus
- 7.5.6 Musnahkan melalui perusahaan limbah pihak ketiga yang telah bekerja sama

8. Dokumen Terkait

- | | |
|--|---------------------|
| 8.1 SPO Persiapan Pemeriksaan Uji Saring IMLTD | (UDDP-IMLTD-L2-002) |
| 8.2 SPO Penanganan Sampel Darah Reaktif | (UDDP-IMLTD-L2-006) |
| 8.3 IK Pemeriksaan CLIA dengan Architect i2000SR | (UDDP-IMLTD-L3-001) |
| 8.4 IK pemeriksaan NAT | (UDDP-IMLTD-L3-002) |

9. Lampiran

- 9.1 Formulir Hasil Uji Saring IMLTD Darah Reaktif Diulang Duplo dan NAT (UDDP-IMLTD-L4-006)
- 9.2 Algoritma Strategi Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L5-001)

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan Perubahan
001	01/12/2022		Dokumen baru



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD**

Bidang
Pelayanan Darah

Sub. Bidang
Rujukan dan Litbang

Halaman 6 dari 6
Nomor : UDDP-IMLTD-L2-003
Versi : ~~002~~ **003**
Tanggal berlaku : 02 Jun 2025
Tanggal kaji ulang : 02 Jun 2027

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan Perubahan
002		PerKa BPOM No.10 Tahun 2017 dan PMK 91 Tahun 2015	• Struktur Organisasi UDD dan Referensi • Prosedur • Persyaratan Sistem Mutu • Perubahan nomor dokumen (Instruksi Kerja, formulir dan ceklis)
003		Inspeksi SK Plasma tanggal 30 April - 2 Mei 2025	Pencantuman bahwa pemeriksaan dilakukan secara individual tes

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01