


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONSOLIDASI PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD

NO DOKUMEN	:	UDDP-IMLTD-L2-008
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	28 FEBRUARI 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	28 FEBRUARI 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 19 Februari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 25 Februari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 27 Februari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 28 Februari 2025

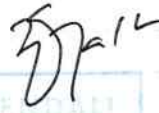

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONSOLIDASI PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 1 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-008 Versi : 002 Tanggal berlaku : 28 Feb 2015 Tanggal kaji ulang : 28 Feb 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menjelaskan proses kegiatan dalam konsolidasi pemeriksaan uji saring IMLTD.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang yang terlibat dalam konsolidasi pemeriksaan uji saring IMLTD.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Rujukan sampel pemeriksaan dilakukan untuk kasus-kasus:

- 3.1.1 Inkompabilitas
- 3.1.2 Kasus reaksi transfusi
- 3.1.3 Konfirmasi pemeriksaan golongan darah
- 3.1.4 Konfirmasi uji saring IMLTD
- 3.1.5 Skrining dan identifikasi antibodi darah resepien dan darah donor
- 3.1.6 Kasus lain yang pemeriksaannya tidak dapat dilakukan di UTD atau BDRS yang bersangkutan


3.2 Alur rujukan sampel darah dapat dilakukan sebagai berikut:

- 3.2.1 Dari BDRS ke UTD setempat
- 3.2.2 Dari UTD kabupaten/kota ke UTD tingkat provinsi atau langsung ke UTD tingkat nasional

3.3 Dalam melakukan rujukan sampel, sampel dipersiapkan, dikemas dan dikirimkan sebagaimana sampel untuk pemeriksaan uji saring IMLTD.

3.4 Sampel untuk konsolidasi uji saring IMLTD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.4.1 Sampel berupa darah lengkap/*whole blood* dalam tabung yang akan dipisahkan sebagai serum atau plasma.
- 3.4.2 Sampel ditampung dalam tabung vakum/tidak vakum yang berukuran 12x75 mm.
- 3.4.3 Tabung sampel terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan tutup dengan antikoagulan maupun tidak.
- 3.4.4 Memiliki label berupa *barcode*/etiket yang berisi: tanggal pengambilan, nomor kantong darah dan tempat pengambilan.
- 3.4.5 Disertai formulir pengiriman sampel darah yang berisi: nomor urut, nomor kantong darah, tanggal pengambilan, asal sampel, diperiksa dan ditandatangani dengan jelas nama petugas pengirim dan petugas yang menerima sampel.
- 3.4.6 Sampel darah tidak boleh hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin.
- 3.4.7 Memiliki masa simpan maksimal kurang dari 3 hari pada suhu 2-6°C
- 3.4.8 Volume spesimen minimal ± 3 mL.

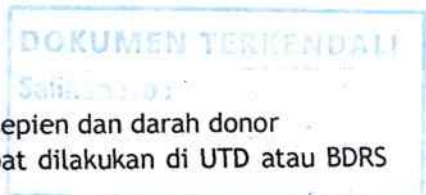

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONSOLIDASI PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 2 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-008 Versi : 002 Tanggal berlaku : 28 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : 28 Feb 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

3.5 Peralatan untuk pemeriksaan konsolidasi uji saring IMLTD harus memenuhi persyaratan berikut:

- 3.5.1 Memiliki ijin edar dari badan yang berwenang (Kemenkes)
- 3.5.2 Telah Lulus evaluasi oleh salah satu badan berwenang (Kementerian Kesehatan, WHO, CE *Marked*, TGA Australia, PEI-Jerman, US-FDA dan UDDP)
- 3.5.3 Memiliki dokumentasi kualifikasi dan validasi peralatan dari vendor
- 3.5.4 Memiliki dokumentasi pemeliharaan peralatan secara rutin
- 3.5.5 Telah dikalibrasi secara berkala dan masa kalibrasi masih berlaku
- 3.5.6 Divalidasi sebelum digunakan

3.6 Reagensia untuk pemeriksaan konsolidasi uji IMLTD harus memenuhi persyaratan berikut:

- 3.6.1 Bahan dan reagen yang digunakan seharusnya hanya berasal dari pemasok yang telah disetujui
- 3.6.2 Bahan dan reagen memenuhi persyaratan serta spesifikasi yang ditetapkan
- 3.6.3 Bahan dan reagen tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan
- 3.6.4 Memiliki ijin edar dan telah dievaluasi dari badan yang berwenang (EU, CE *Marked*, ISO, Kemenkes, UDDP)
- 3.6.5 Memiliki instruksi kerja/*leaflet* pada setiap reagensia dan kit tes (cek kesesuaian antara *insert kit* dengan reagen)
- 3.6.6 Divalidasi sebelum digunakan

4. Referensi

- 4.1 PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 IMLTD adalah Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
- 5.2 Konsolidasi adalah pengiriman sampel darah dalam tabung yang dikirim oleh UDD kepada UDD lain yang akan melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD. Hasil pemeriksaan yang diperoleh akan dikirimkan kembali ke UDD pengirim.
- 5.3 Uji Saring adalah salah satu tahap di dalam pengelolaan darah yang dilakukan oleh Palang merah Indonesia (PMI) untuk mendapatkan darah yang aman bagi pengguna darah dengan menyaring beberapa penyakit infeksi yang menular lewat transfusi darah.

DOKUMEN TERKONTROL
Salin: 28.02.2025

MATER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONSOLIDASI PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 3 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-008 Versi : 002 Tanggal berlaku : 28 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : 28 Feb 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

6. Peran Dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung jawab
Manajer Kualitas	• Mengesahkan SPO Konsolidasi Pemeriksaan Uji Saring IMLTD • Melakukan kontrol dokumen • Memberikan nomor register pada formulir dan SPO • Memastikan bahwa inspeksi kegiatan dalam SPO ini termasuk audit internal reguler berjalan baik
Kepala Bidang Pelayanan Darah	• Membuat kebijakan secara umum pada bidang pelayanan UDDP dan secara khusus yang berkaitan dengan konsolidasi pemeriksaan uji saring IMLTD • Memberikan persetujuan pada keseluruhan kegiatan yang berlangsung di bidang pelayanan UDDP khususnya terkait dengan konsolidasi pemeriksaan uji saring IMLTD • Menyetujui SPO Konsolidasi Pemeriksaan Uji Saring IMLTD
Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang	• Memeriksa SPO Konsolidasi Pemeriksaan Uji Saring IMLTD • Mengawasi proses persiapan pemeriksaan uji saring IMLTD. • Menjelaskan SPO ini kepada seluruh staf di sub bidang Rujukan dan Litbang • Memeriksa pencatatan dan dokumentasi persiapan untuk uji saring IMLTD setiap minggu dan bulannya secara periodik untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah terlaksana dan tercatat. • Memeriksa dan memastikan bahwa setiap persiapan pemeriksaan sesuai dengan SPO persiapan uji saring IMLTD. • menandatangani konfirmasi bahwa telah diperiksa.
Staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang	• Melakukan penerimaan sampel konsolidasi pemeriksaan uji saring IMLTD • Melakukan persiapan pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai dengan SPO • Melakukan pemeriksaan konsolidasi pemeriksaan uji saring IMLTD

DOKUMEN TERKENDALI

Sub. Litbang

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONSOLIDASI PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 4 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-008 Versi : 002 Tanggal berlaku : 28 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : 28 Feb 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

	- Melakukan validasi terhadap kegiatan pada persiapan pemeriksaan uji saring IMLTD - Melakukan pencatatan dan dokumentasi setiap formulir yang telah ditandatangani dengan lengkap dan disahkan oleh penanggung jawab - Menyusun atau mengkaji ulang SPO Konsolidasi Pemeriksaan Uji Saring IMLTD
--	---

7. Prosedur

7.1 Prosedur penerimaan sampel darah uji saring IMLTD

- 7.1.1 Pastikan bahwa sampel darah untuk pemeriksaan uji saring IMLTD dikirim oleh petugas pengiriman menggunakan kontainer atau transport sesuai standar dengan suhu yang terkontrol
- 7.1.2 Gunakan alat pelindung diri (APD) ketika menerima dan menyimpan sampel darah
- 7.1.3 Pastikan bahwa sampel darah uji saring telah dilengkapi dengan formulir pengiriman sampel pada saat dikirim ke laboratorium uji saring IMLTD
- 7.1.4 Pastikan bahwa sampel darah memenuhi persyaratan kualitas sebagai sampel uji saring IMLTD
- 7.1.5 Ketika sampel darah tidak sesuai dengan persyaratan kualitas :
 - 7.1.5.1 Segera pisahkan, tolak untuk dikembalikan dengan mengisi Formulir Pengembalian Sampel Rusak (UDDP-IMLTD-L4-002)
 - 7.1.5.2 Beri tanda pada formulir jika sampel tidak cocok atau tidak sesuai persyaratan kualitas
 - 7.1.5.3 Tempatkan pada rak khusus, berikan identitas yang jelas pada rak tersebut
- 7.1.6 Lakukan serah terima sampel menggunakan Formulir Penerimaan Sampel Darah Konsolidasi Pemeriksaan IMLTD (UDDP-IMLTD-L4-001)
- 7.1.7 Pastikan bahwa sampel darah yang telah diterima ditempatkan ke dalam rak khusus dan beri label atau identitas yang jelas
- 7.1.8 Pastikan bahwa sampel darah tersebut disimpan pada suhu yang sesuai sebelum proses pemeriksaan
- 7.1.9 Tanda tangani formulir pengiriman sampel baik oleh petugas pengirim maupun petugas uji saring IMLTD dan konfirmasi serologi golongan darah yang menerima
- 7.1.10 Lakukan pencatatan dan dokumentasi setiap formulir pengiriman atau penerimaan sampel uji saring IMLTD

7.2 Persiapan sampel darah untuk uji saring IMLTD

- 7.2.1 Gunakan alat pelindung diri (APD) ketika mempersiapkan sampel darah untuk uji saring IMLTD
- 7.2.2 Pastikan bahwa sampel darah uji saring telah dilengkapi formulir serah terima sampel



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONSOLIDASI PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 5 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-008 Versi : 002 Tanggal berlaku : 28 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : 28 Feb 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 7.2.3 Pastikan bahwa sampel darah untuk pemeriksaan uji saring IMLTD telah cocok sesuai dengan formulir dan divalidasi sebelum dilakukan penanganan
- 7.2.4 Lakukan persiapan pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai dengan IK Persiapan Pemeriksaan Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L2-002)
- 7.3 **Pemeriksaan dan pencatatan hasil uji saring IMLTD**
 - 7.3.1 Gunakan alat pelindung diri (APD) ketika melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD
 - 7.3.2 Lakukan pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan CLIA dengan Architect i2000SR ((UDDP-IMLTD-L3-001) dan atau Instruksi Kerja Pemeriksaan NAT (UDDP-IMLTD-L2-003)
 - 7.3.3 Lakukan pencatatan hasil uji saring IMLTD metode CLIA dan atau NAT sesuai dengan SPO (UDDP-IMLTD-L2-003)
- 7.4 **Pengiriman hasil Uji saring ke UDD pengirim**
 - 7.4.1 Lakukan pengiriman hasil uji saring IMLTD setelah selesai melakukan pemeriksaan pada setiap sampel darah konsolidasi dengan mengirimkan hasil/*print out* via email UDD ataupun penanggung jawab UDD pengirim
 - 7.4.2 Pastikan pengiriman tersebut telah dikonfirmasi oleh UDD penerima
- 7.5 **Dokumentasi sampel Uji Saring IMLTD**
 - 7.5.1 Setelah selesai melakukan pemeriksaan pada setiap sampel darah donor, lakukan penyimpanan terhadap tabung sampel darah donor selama 1 (satu) minggu pada suhu 2-6 C°
 - 7.5.2 Simpan pada *refrigerator* yang berlabel "Arsip Sampel Darah Sudah Diperiksa"
 - 7.5.3 Beri label tanggal pemeriksaan pada setiap rak
 - 7.5.4 Apabila sudah 1 (satu) minggu, tabung darah donor yang disimpan boleh dibuang
 - 7.5.5 Masukkan kedalam kantong limbah kuning dan serahkan ke petugas pengelola limbah laboratorium UDDP untuk dikumpulkan pada penampung khusus
 - 7.5.6 Musnahkan melalui perusahaan limbah pihak ketiga yang telah bekerja sama
8. **Dokumen Terkait**
 - 8.1 SPO Persiapan Pemeriksaan Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L2-002)
 - 8.1. SPO Pemeriksaan Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L2-003)
9. **Lampiran**
 - 9.1 Formulir Pengembalian Sampel Rusak (UDDP-IMLTD-L4-002)
 - 9.2 Formulir Penerimaan Sampel Darah Konsolidasi Pemeriksaan IMLTD (UDDP-IMLTD-L4-001)



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONSOLIDASI PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 6 dari 6 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-008 Versi : 002 Tanggal berlaku : 28 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : 28 Feb 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	01/12/2022		Dokumen baru
002	28/02/2025	PerKa BPOM No.10 Tahun 2017	- Struktur Organisasi UDD dan Referensi - Prosedur - Perubahan nomor dokumen (Instruksi Kerja, formulir dan ceklis)

