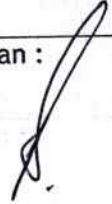


INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L3-004
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	28 JUNI 2024
TANGGAL KAJI ULANG	:	28 JUNI 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Shaffa Auliya Hawwa, A.Md. Kes Staff Pemastian Mutu Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan :  Tanggal: 21 Juni 2024
Diperiksa oleh : Frida Rosita, S.Si., M.Biomed Kasubid Kontrol Dokumen Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan :  Tanggal: 25 Juni 2024
Disetujui oleh : Mega Octavia, S.Si Kasubid Pemastian Mutu Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan :  Tanggal: 26 Juni 2024
Disahkan oleh : dr. Srihartaty, M.Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan :  Tanggal: 27 Juni 2024

DOKU
Salinan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI		Halaman 1 dari 7 Nomor : UDDP-MK-L3-004 Versi : 001
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026

1. Tujuan

Instruksi kerja ini digunakan sebagai petunjuk dalam menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) oleh petugas sebagai bentuk upaya mencegah dan mengendalikan infeksi bagi petugas dan donor serta meminimalisir terjadinya kontaminasi pada produk darah yang dihasilkan.

2. Ruang Lingkup

IK ini akan digunakan oleh seluruh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan melakukan indikasi yang mengharuskan untuk menggunakan APD di lingkungan UDD Pusat.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 2.20

Untuk memastikan perlindungan produk, donor dan karyawan terhadap kontaminasi, personil hendaklah mengenakan pakaian pelindung bersih yang sesuai untuk tugas yang mereka lakukan. Pakaian pelindung yang kotor, bila digunakan kembali, hendaklah disimpan terpisah dalam wadah tertutup sampai dicuci dengan baik dan, bila perlu, didesinfeksi atau disterilisasi. Bila diperlukan, gunakan sarung tangan sekali pakai atau steril saat menangani bahan yang mungkin bersentuhan dengan darah atau komponen darah. Prosedur higiene personil, termasuk penggunaan pakaian pelindung dan peralatan yang sesuai, hendaklah berlaku untuk semua personil yang memasuki area pengolahan

3.2 Kepala UTD menetapkan ketentuan di mana APD tersebut harus tersedia dan diberikan edukasi untuk cara pemakaiannya, melepas serta membuang APD yang benar.

3.3 UTD memberikan edukasi pemakaian APD kepada seluruh petugas yang memerlukan penggunaan APD.

3.4 APD harus digunakan sesuai dengan risiko paparan: Petugas kesehatan harus menilai apakah mereka benar atau tidak berisiko terkena darah, cairan tubuh, ekskresi atau sekresi agar dapat menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan risiko.

3.5 Tidak berbagi APD yang sama antara dua petugas/individu

3.6 APD harus tersedia di setiap tempat sesuai dengan kebutuhan.


3.7 APD di UTD meliputi baju laboratorium, apron, pembungkus kepala sekali pakai, kaca mata pelindung, masker, sarung tangan sekali pakai, sarung tangan sekali pakai, sepatu tertutup khusus untuk di laboratorium atau pembungkus sepatu sekali pakai dan sepatu boot

3.8 Semua APD yang akan digunakan harus memenuhi standar keamanan, perlindungan dan keselamatan petugas maupun donor sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.9 Sarung tangan, masker, pelindung mata, serta alat pelindung diri lainnya tersedia dan digunakan secara tepat apabila disyaratkan. Lebih lanjut, harus dilakukan evaluasi apakah APD sudah digunakan secara tepat dan benar.

3.10 Penutup kepala hendaknya terdiri dari bahan yang digunakan sekali pakai dan yang dapat digunakan ulang (terbuat dari bahan yang dapat dilakukan pencucian), terbuat dari bahan tahan cairan, tidak mudah robek, dan ukurannya pas atau sesuai di kepala pemakai

3.11 Sepatu laboratorium harus menutupi seluruh ujung dan telapak kaki dan tidak dianjurkan untuk menggunakan sandal atau sepatu terbuka. Sepatu juga sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah dicuci dan tahan tusukan misalnya karet atau plastik.

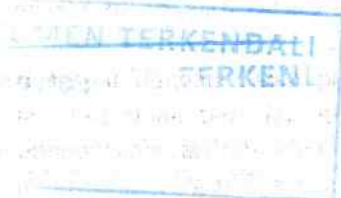

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI		Halaman 2 dari 7 Nomor : UDDP-MK-L3-004 Versi : 001
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026

- 3.12 Petugas harus mengenakan alat pelindung diri (APD) di area dimana darah ditangani dan dimana ada risiko tumpahan, percikan atau aerosol. APD harus memadai untuk setiap kegiatan, meliputi:

No.	Jenis Kegiatan	Jenis APD
1.	Pengambilan Darah	- Baju laboratorium - Sarung tangan sekali pakai - Masker (untuk menghindari kontaminasi dari petugas)
2.	Pemeriksaan Laboratorium (IMLTD, Konfirmasi Golongan Darah dan Uji Mutu)	- Baju laboratorium - Sepatu tertutup khusus untuk laboratorium atau pembungkus sepatu sekali pakai - Sarung tangan sekali pakai - Kacamata pelindung - Penutup kepala (bagi yang tidak berhijab) - Masker
3.	Pengolahan Komponen Darah, Produk rilis, Penyimpanan dan Distribusi	- Baju laboratorium - Sepatu tertutup khusus untuk laboratorium atau pembungkus sepatu sekali pakai - Sarung tangan sekali pakai - Pembungkus kepala sekali pakai
4.	Logistik, Bahan Baku Fraksionasi Plasma dan Locket	- Sarung tangan - Masker - Sepatu boot (jika memasuki coldroom/freezer room) - Sarung tangan tebal (jika memasuki coldroom/freezer room) - Jaket tebal (jika memasuki coldroom/freezer room)
5.	Pengunjung ke area yang telah disebutkan di atas	APD yang digunakan oleh pengunjung adalah APD <i>disposable</i> dan sesuai area kegiatan yang dikunjungi
6.	<i>Cleaning Service</i>	- Baju laboratorium - Apron - Sepatu boot - Sarung tangan latex - Kacamata pelindung - Penutup kepala - Masker

- 3.13 Petugas yang terlibat dalam pembuangan limbah (pengemasan dan pengiriman limbah ke tempat pembuangan) harus mengenakan APD yang memadai (baju pelindung, sarung tangan, masker, sepatu tertutup)

DOKUMEN TERKENDALI

Revisi No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI		Halaman 3 dari 7 Nomor : UDDP-MK-L3-004 Versi : 001
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026

- 3.14 APD harus dilepaskan ketika meninggalkan area kerja
- 3.15 Lakukan kebersihan tangan setiap kali melepas APD ketika sudah selsai melakukan tindakan medis atau akan melakukan prosedur lain dnegan berbeda pasien/pendonor.
- 3.16 Jas laboratorium dan pelindung kepala (kain) hendaklah diganti setiap tiga hari sekali atau setiap terkena percikan darah/reagen dan kotoran lainnya
- 3.17 Hindari kontak antara APD yang terkontaminasi (bekas) dan permukaan pakaian atau lingkungan pelayanan kesehatan, buang APD bekas pakai yang sesuai dengan tempat limbah dan standar yang ditetapkan.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No.91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 Peraturan Menteri Kesehatan No.27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- 4.3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah
- 4.4 Perka BPOM No.10 tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plamsaaferesis
- 4.5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1313/2023 tentang Standar Akreditasi Unit Transfusi Darah

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan
- 5.2 Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan *tool* yang telah ditentukan
- 5.3 Peluang adalah periode di antara indikasi dimana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien/donor) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan
- 5.4 Petugas adalah seluruh tenaga yang terindikasi harus menggunakan APD, contoh dokter, perawat, petugas kebersihan, serta tenaga kesehatan lainnya
- 5.5 APD : Alat Pelindung Diri adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau atau transmisi penyakit atau infeksi

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI		Halaman 4 dari 7 Nomor : UDDP-MK-L3-004 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab
Manajer Kualitas	• Memberikan nomor kontrol dokumen • Menyimpan dokumen IK yang asli dan membuat salinan yang akan didistribusikan kepada bagian yang terdapat dalam daftar distribusi dokumen • Mensahkan IK Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) • Memastikan pelaksanaan IK Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dilakukan dengan tepat sesuai prosedur dan indikasi yang telah ditetapkan
Kepala Bidang Pelayanan Darah dan Penunjang	• Memastikan pelaksanaan IK Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dilakukan dengan tepat sesuai prosedur dan indikasi yang telah ditetapkan
Kasie Rumah Tangga	• Menyediakan fasilitas atau ruangan untuk menggunakan dan melepas APD
Petugas	• Menggunakan APD sesuai dengan prosedur dan indikasi yang telah ditetapkan • Menggunakan APD sesuai dengan prosedur setelah menangani limbah dan tumpahan bahan biologis
Observer	• Melakukan observasi terhadap kepatuhan penggunaan APD

7. Peralatan dan Bahan

7.1. Peralatan

- 7.1.1. Baju/jas laboratorium
- 7.1.2. Jaket Tebal
- 7.1.3. Sepatu laboratorium
- 7.1.4. Sepatu Boot
- 7.1.5. Kacamata
- 7.1.6. Pelindung wajah

7.2. Bahan

- 7.2.1. Penutup sepatu sekali pakai
- 7.2.2. Penutup kepala sekali pakai
- 7.2.3. Masker


8. Prosedur

- 8.1 Lakukan kebersihan tangan sebelum menggunakan APD menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan desinfektan
- 8.2 Gunakan APD sebelum memulai kegiatan yang berisiko terpapar bahan yang bersifat infeksius dengan cara:
 - 8.2.1. Gunakan baju/jas laboratorium untuk seluruh tubuh dan tangan dengan belahan ikatan berada di belakang tubuh
 - 8.2.2. Kencangkan di belakang leher dan pinggang


OKUMEN TERKONTROL

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI		Halaman 5 dari 7 Nomor : UDDP-MK-L3-004 Versi : 001
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026

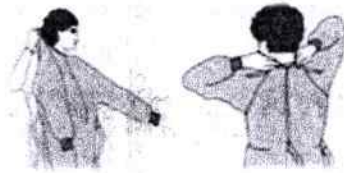

- 8.2.3. Gunakan masker dengan tali ke bagian belakang kepala dengan aman dan nyaman
- 8.2.4. Pasang penjepit fleksibel ke atas tulang hidung.
- 8.2.5. Tutupi hidung, wajah dan di bawah dagu (*fit test*)

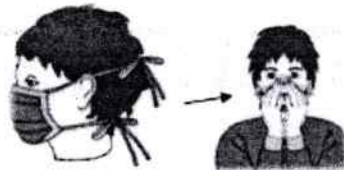


- 8.2.6. Tempatkan kacamata atau pelindung atau pelindung wajah dan mata sesuaikan agar pas dan nyaman



- 8.2.7. Pasang sarung tangan dengan menutup ujung gaun pada pergelangan tangan dengan cara:

- 8.2.7.1. Ambil salah satu sarung tangan dengan memegang pada sisi sebelah dalam lipatannya, yaitu bagian yang akan bersentuhan dengan kulit tangan saat dipakai
- 8.2.7.2. Posisikan sarung tangan setinggi pinggang dan menggantung ke lantai sehingga bagian lubang jari-jari tangannya terbuka
- 8.2.7.3. Masukkan tangan ke dalam sarung tangan
- 8.2.7.4. Ambil sarung tangan yang ke dua dengan cara menyelipkan jari-jari tangan yang sudah memakai sarung tangan ke bagian lipatan yaitu bagian yang tidak akan bersentuhan dengan kulit saat dipakai
- 8.2.7.5. Pasang sarung tangan yang kedua dengan cara memasukkan jari-jari tangan yang belum memakai kemudian luruskan lipatan dan atur posisi sarung tangan sehingga terasa pas di tangan

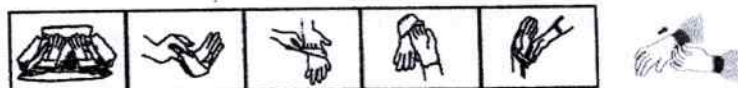


	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI		Halaman 6 dari 7 Nomor : UDDP-MK-L3-004 Versi : 001
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026

8.3 Lepas APD yang telah digunakan dengan cara:

8.3.1. Lepaskan sarung tangan dengan cara:


- 8.3.1.1. Pegang bagian luar sarung tangan dengan tangan yang memakai sarung tangan berlawanan artinya jepit dan pegang sarung tangan, tarik kebawah dan sarung tangan dilepas hingga menyatu dalam genggam tangan. Jangan dibuka sampai terlepas sama sekali, biarkan sebagian masih berada pada tangan sebelum melepas sarung tangan yang ke dua
- 8.3.1.2. Biarkan sarung tangan yang pertama sampai disekitar jari-jari, lalu pegang sarung tangan yang ke dua pada lipatan lalu Tarik ke arah ujung jari sehingga bagian dalam sarung tangan menjadi sisi luar
- 8.3.1.3. Setelah keduanya berada di ujung jari, maka secara bersamaan dan hati-hati sarung tangan dilepas.
- 8.3.1.4. Geser jari-jari tangan yang tidak bersarung tangan di bawah sarung tangan yang tersisa di pergelangan tangan. Lepaskan sarung tangan dari sarung tangan pertama.

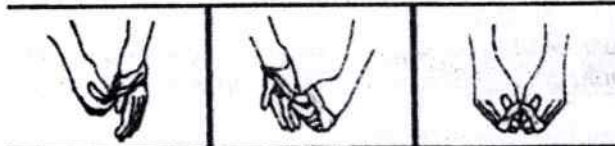

8.3.2. Lakukan kebersihan tangan setelah melepas sarung tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan desinfektan

8.3.3. Lepaskan kacamata dan pelindung wajah dengan cara:

- 8.3.3.1. Lepaskan kacamata dan pelindung wajah dari belakang dengan mengangkat pita kepala dan tanpa menyentuh bagian depan kacamata atau pelindung kepala
- 8.3.3.2. Letakkan pelindung wajah atau kacamata ditempat yang disediakan jika ingin digunakan kembali atau dibuang ke tempat limbah infeksius jika tidak ingin digunakan kembali

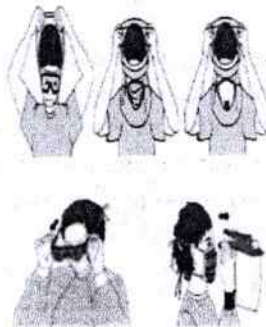

8.3.4. Lepaskan baju/jas laboratorium dengan cara:

8.3.4.1. Pegang baju/jas laboratorium di bagian depan






 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI		Halaman 7 dari 7 Nomor : UDDP-MK-L3-004 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

8.3.4.2. Tarik keluar dari tubuh sehingga ikatannya putus, menyentuh bagian luar baju/jas laboratorium hanya dengan tangan bersarung

8.3.4.3. Saat melepas baju/jas laboratorium lipat atau gulung baju/jas laboratorium dari bagian dalam ke bagian luar



8.3.5. Lepaskan masker dengan cara memegang tali atau ikatan dari belakang kepala ke arah depan

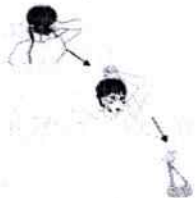

8.4 Buang APD bekas pakai ke tempat limbah infeksius

8.5 Ganti jas laboratorium dan penutup kepala (kain) tiap tiga hari sekali atau setiap terkena cairan darah/reagen atau kotoran lainnya

8.6 Lakukan penanganan APD yang dapat digunakan kembali setelah digunakan dengan cara:

8.6.1. Rendam APD pada larutan klorin 0,5% selama 10 menit

8.6.2. Cuci dengan bersih dan keringkan

8.6.3. Simpan kembali untuk dapat digunakan kembali

Jika penanganan APD dilakukan oleh pihak ketiga pastikan pihak ketiga adalah pihak yang telah direkomendasikan dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan

8.7 Lakukan pengamatan oleh observer kepada petugas pemberi pelayanan yang dilaporkan setiap satu bulan dengan cara mengamati kepatuhan petugas dalam menggunakan APD

8.8 Lakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengamatan jumlah peluang yang diamati menggunakan Formulir Kepatuhan Kebersihan Tangan dan Penggunaan APD (UDDP-MK-L4-040)

9. Lampiran

Formulir Observasi Kepatuhan Kebersihan Tangan dan Penggunaan APD (UDDP-MK-L4-040)

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal pelaksanaan	Referensi	Riwayat Perubahan
001	28 Juni 2024	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1313/2023 tentang Standar Akreditasi Unit Transfusi Darah	Dokumen Baru

TERKEN

