


|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| Werk Blood Refrigerator | : | KIRSCH BL 300 |
| Normor Seri/Kode Unik   | : | 2800925535    |
| Lokasi                  | : | Lab. Komponen |
| Bgian                   | : |               |

|                  |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
| Suhu Isaran      | : | +2 °C sampai -6 °C |
| Suhu operasional | : | +4 °C              |
| Set Alarm        | : | +3 °C dan +5 °C    |
| Nilai Koreksi    | : |                    |





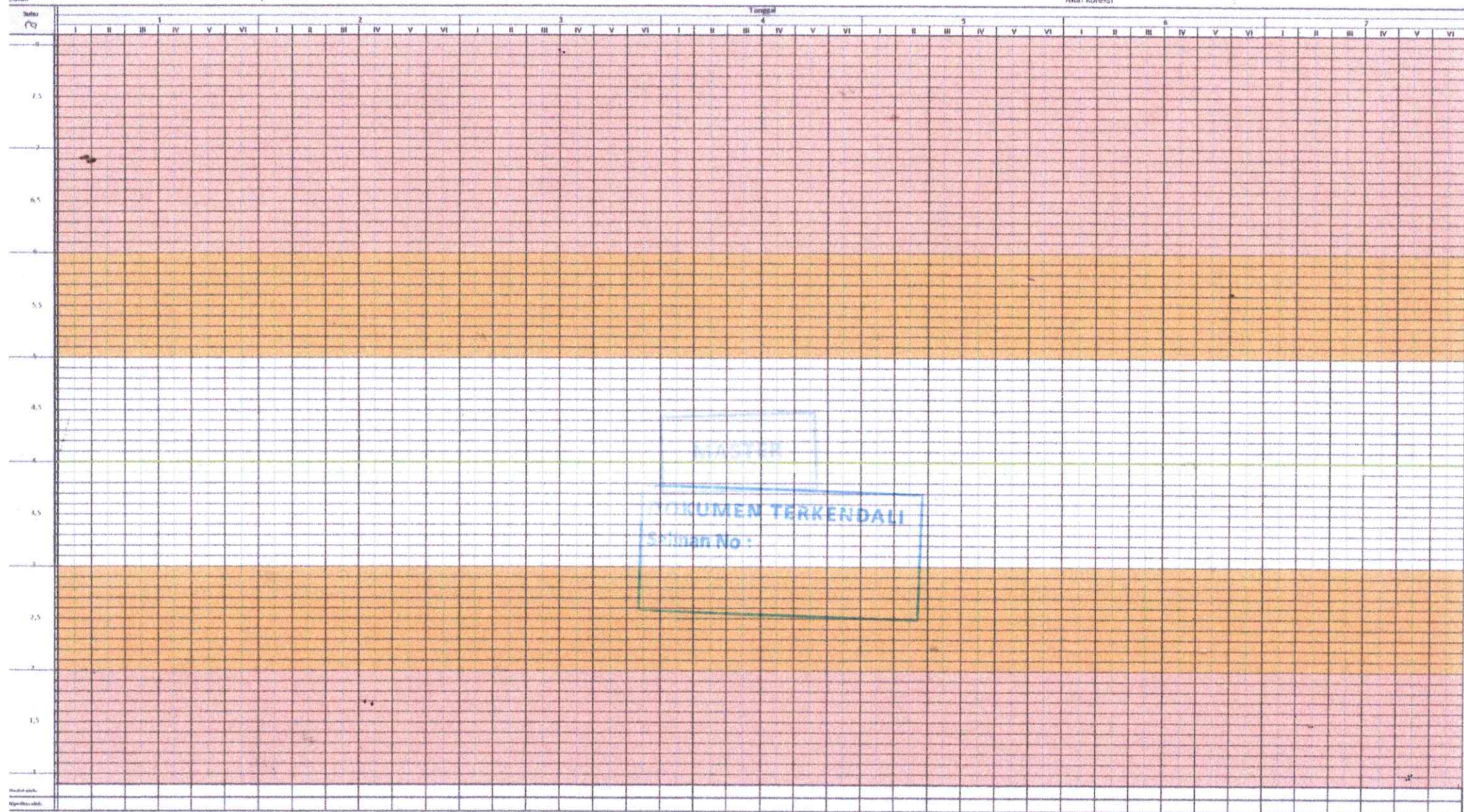








|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| Merk Blood Refrigerator | : | KIRSCH BL 300 |
| Nomor Seri/Kode Uniq    | : | 2800925535    |
| Lokasi                  | : | Lab. Komponen |
| Bulan                   | : |               |


|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| Suhu kisaran     | ± | +2°C sampai +6°C |
| Suhu operasional | ± | +4 °C            |
| Set Alarm        | ± | +3 °C dan +5 °C  |
| Nilai Koreksi    | ± |                  |

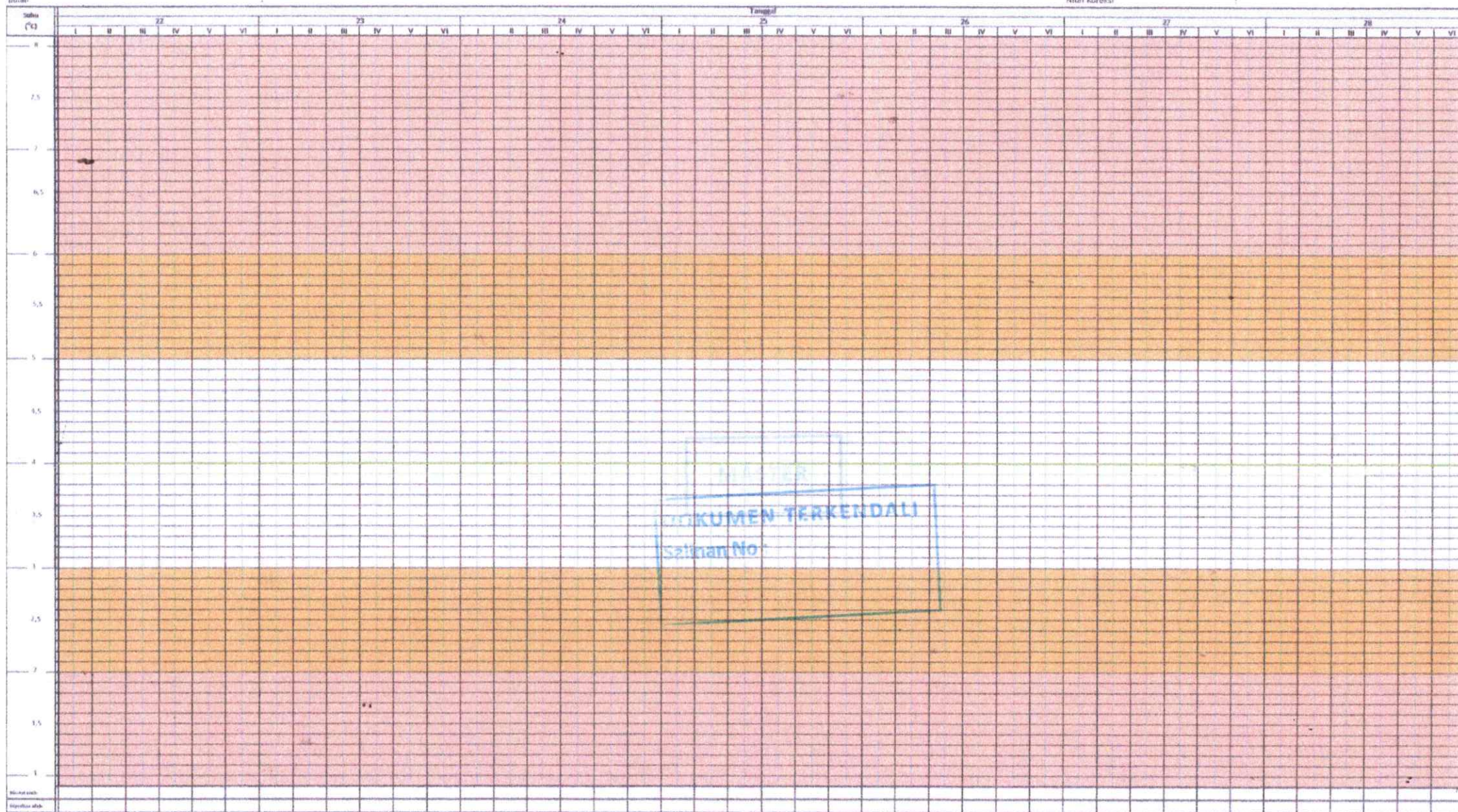



Mark Blood Refrigerator : KIRSCH BL 300  
Nomor Seri/Kode Unik : 2B00925535  
Lokasi : Lab. Komponen  
Bulan :

Suhu kisaran : +2°C sampai +6°C  
Suhu operasional : +4 °C  
Set Alarm : +3 °C dan +5°C  
Nilai Koreksi :

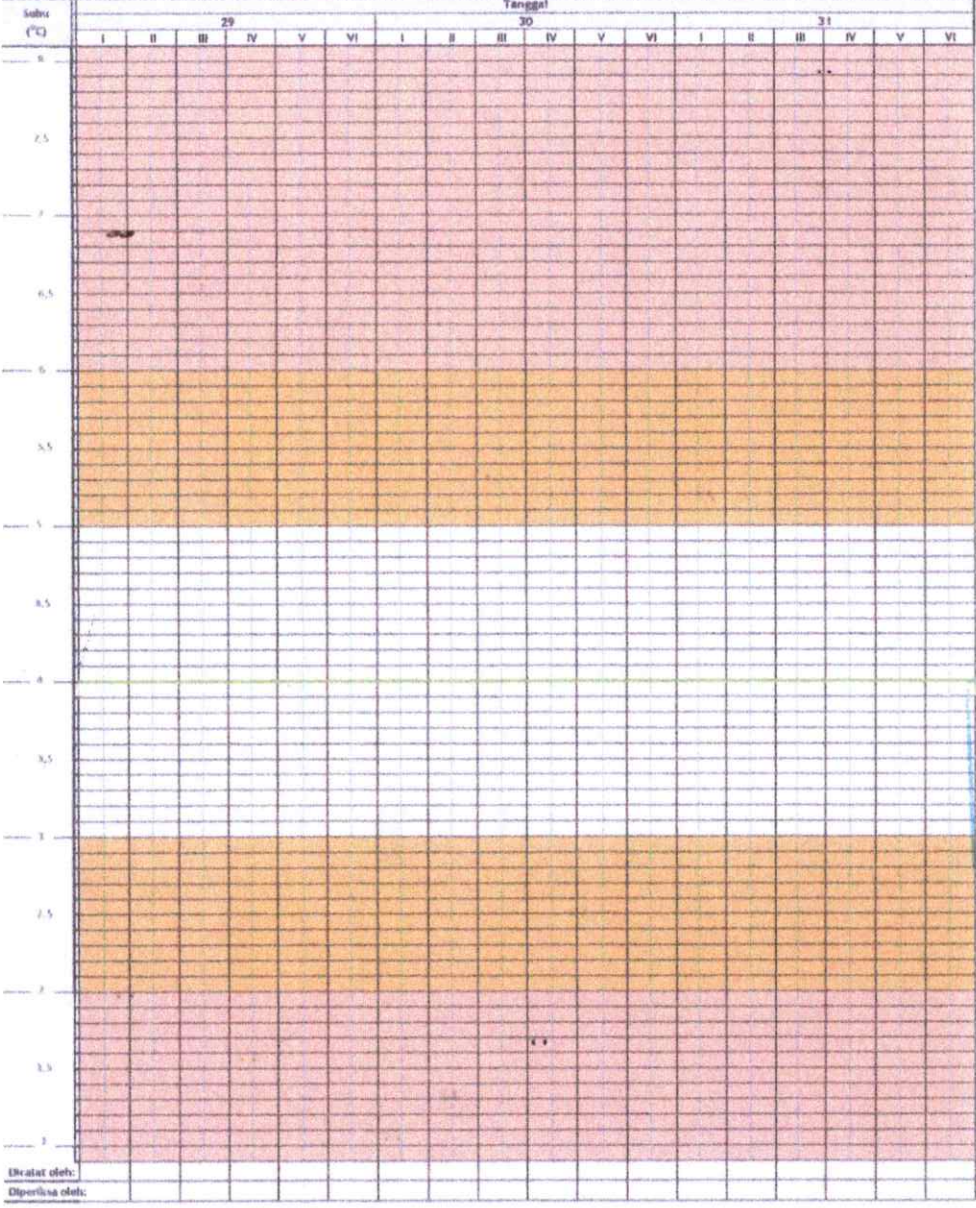

Keterangan :

- Status suhu sesuai spesifikasi
- Status suhu Alarm (indikasi alarm)
- Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan catat suhu, dengan memberi titik pada garis biru)
- Kolom cek alarm disetiap dilakukan kalibrasi

1. Bubuhkan titik pada kolom suhu yang sesuai dengan tanggal dan waktu pemantauan suhu

2. Pemantauan Suhu dilakukan pada:

- I : Pada pukul 07.00 ±15 menit
- II : Pada pukul 11.00 ±15 menit
- III : Pada pukul 15.00 ±15 menit
- IV : Pada pukul 19.00 ±15 menit
- V : Pada pukul 23.00 ±15 menit
- VI : Pada pukul 03.00 ±15 menit

3. Tarik garis dari titik tersebut sehingga menjadi diagram garis

4. catat suhu setting alarm disetiap 6 (enam) bulan sekali pada kolom cek alarm

5. Petugas pemeriksa menandatangani paraf pada kolom paraf

6. Jika suhu menunjukkan angka pada daerah yang dierisi, segera laporkan kepada kepala seksi/bagian terkait

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

Ditatat oleh:  
Diperiksa oleh:

### Pelaporan Kejadian Penyimpangan Suhu

### Pengecekan Alarm

| Pengukuran Alarm | Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu) |       | Keterangan | Dicatat Oleh | Diperiksa Oleh |
|------------------|------------------------------------|-------|------------|--------------|----------------|
|                  | Berfungsi                          | Tidak |            |              |                |
|                  |                                    |       |            |              |                |
|                  |                                    |       |            |              |                |