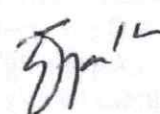
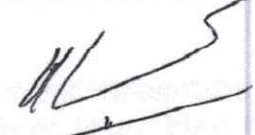


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L2-008
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	23 November 2022
TANGGAL REVIEW	:	23 November 2024
STATUS DOKUMEN	:	☐ MASTER ☐ COPY NO :

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14. 11.2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 16. 11.2022
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 18. 11.2022
Disahkan oleh: Dr.dr. Saptuti Chunaeni, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 22. 11.2022

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L2- 008 Versi : 001 Tgl. berlaku: 23 Nov 2022 Tgl.kaji ulang:23 Nov 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini bertujuan menghasilkan komponen darah melalui proses pengolahan yang memenuhi standar sistem kualitas.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh personil teknis pengolahan darah di UDD Pusat Palang Merah Indonesia.

3. Persyaratan Sistem Kualitas

- 3.1 Area pengolahan memenuhi sistem manajemen mutu.
- 3.2 Peralatan yang digunakan bermutu dan telah disetujui untuk dipakai, digunakan sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi dan instruksi pabrik
- 3.3 Peralatan yang digunakan dibersihkan, dipelihara dan dikalibrasi teratur.
- 3.4 Pengolahan darah mampu menghasilkan komponen darah yang memenuhi spesifikasi komponen darah secara konsisten dan berkesinambungan
 - Durasi pengambilan darah :
 - hingga 12 menit untuk semua komponen darah
 - 12 s.d 15 menit PRC saja
 - lebih dari 15 menit darah tidak dapat diolah
 - Volume keberterimaan darah 350mL/450 mL $\pm$ 10%
 - Suhu transportasi komponen darah 20°C - 24°C dalam 6 jam sudah menjadi FFP
 - Suhu transportasi komponen darah 20°C - 24°C dibekukan dalam 24 jam disebut Plasma Frozen (PF24)
 - Penusukan lebih dari dua kali tidak dapat diolah jadi komponen FFP
- 3.5 Pengolahan darah menggunakan sistem tertutup dan bebas kontaminasi bakteri, setiap kantong yang bocor harus dibuang
- 3.6 Pengolahan darah menggunakan metode yang tervalidasi

4. Referensi

- Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015
- Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis BPOM tahun 2017
- Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH		Halaman 2 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L2- 008 Versi : 001 Tgl. berlaku: 23 Nov 2022 Tgl.kaji ulang:23 Nov 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1 Kalibrasi : Serangkaian tindakan pada kondisi tertentu untuk menentukan tingkat kesamaan nilai yang diperoleh dari sebuah alat atau sistem ukur, atau nilai yang dipresentasikan dari pengukuran bahan dan membandingkan dengan nilai yang telah diketahui dari suatu acuan standar pada kondisi tertentu
- 5.2 CCP (Critical Control Point) : suatu titik, tahap, atau prosedur dimana bahaya yang berhubungan dengan produk darah dan komponennya dapat dicegah, dieliminasi, atau dikurangi hingga ke titik yang dapat diterima (diperbolehkan atau titik aman).

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab
Manajer Kualitas	Melakukan kontrol dokumen pengolahan komponen darah
Kepala bidang Pelayanan Darah	- Memberikan persetujuan pada keseluruhan kegiatan yang berlangsung di sub bidang penyediaan darah - Mengesahkan dokumen SPO
Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi Penyediaan Darah	- Mengatur kecukupan petugas, peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan - Inspeksi secara periodik proses pengolahan komponen - Melakukan evaluasi hasil pengolahan komponen darah - Menentukan CCP dalam proses pengolahan komponen darah
Personil Teknis Komponen Darah	- Melakukan pengolahan komponen darah secara aseptik - Melakukan proses pengolahan komponen dengan baik dan benar - Melakukan pencatatan dan pelaporan

7. Prosedur

- 7.1 Gunakan APD sesuai prosedur
- 7.2 Siapkan peralatan dan bahan habis pakai pengolahan komponen darah
- 7.3 Timbang volume darah lengkap menggunakan timbangan darah digital yang sudah dikalibrasi
- 7.4 Pisahkan darah yang tidak sesuai dengan keberterimaan volume darah dan atau durasi pengambilan darah, beri label "darah tidak dapat diproses", untuk dibuang ke tempat limbah infeksius
- 7.5 Lakukan pengolahan komponen darah sesuai Instruksi Kerja Pengolahan Komponen Darah
- 7.6 Masukkan data komponen darah ke SIMDONDAR

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH		Halaman 3 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L2- 008 Versi : 001 Tgl. berlaku: 23 Nov 2022 Tgl.kaji ulang:23 Nov 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

8. Dokumen Terkait

- UDDP-PDD-L3-019 Instruksi Kerja pengolahan komponen darah
- UDDP-PDD-L4-013 Formulir pengolahan komponen darah

9. Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal	Riwayat Perubahan
001	23/11/2022	- Dokumen baru

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :