
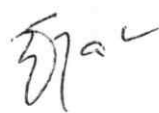


INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-003
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	14 NOVEMBER 2022
TANGGAL KAJI ULANG	:	14 NOVEMBER 2024
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO : ☒

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 08 November 2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 08 November 2022  08.11.22
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M,Biomedik Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 09 November 2022
Disahkan oleh: Dr.dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 10 November 2022

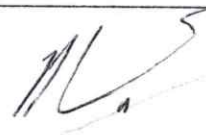

 Palang Merah Indonesia	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-003 Versi : 001 Tgl. berlaku : 14-11-2022 Tgl. kaji ulang : 14-11-2024
	Unit Donor Darah Pusat	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah

1. Tujuan

Instruksi kerja ini menjelaskan proses pemeriksaan kadar hemoglobin darah calon pendonor dengan metoda CuSO_4 (Cupri Sulfat) dan Hb meter.

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas seleksi donor pada saat pemeriksaan hemoglobin calon pendonor

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 7.31 Pemeriksaan Fisik, Kriteria Kesehatan Donor dan Keberterimaan Donor

Berdasarkan peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh ORN, pemeriksaan fisik dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah pengawasan dokter berizin. ORN, setelah berkonsultasi dengan UTD dan Pusat Plasmaferesis, hendaklah menetapkan kriteria kesehatan dan batas keberterimaan pada saat pemeriksaan fisik seperti pengukuran hemoglobin, tekanan darah, berat badan, usia, denyut nadi dan suhu atau kriteria lain yang dipertimbangkan untuk menjaga keamanan komponen darah atau donor.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa No 10 tahun 2018 Pedoman CPOB untuk unit penyedia darah

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1.1 Petugas Seleksi donor adalah petugas yang sudah terlatih melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin pendonor darah
- 5.1.2 CuSO_4 adalah larutan kimia yang digunakan untuk memeriksa hemoglobin secara sederhana
- 5.1.3 Hb Meter adalah alat untuk mengukur kadar hemoglobin pendonor darah

5.2 Singkatan

- 5.2.1 IK : Instruksi Kerja
- 5.2.2 CuSO_4 : Cupri Sulfat
- 5.2.3 Hb : Hemoglobin
- 5.2.4 PerKa : Peraturan Kepala
- 5.2.5 CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar

6. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

6.1 Peralatan

Auto click
 Beaker glass ukuran 30 ml
 Hb meter
 Tempat lancet





Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 1 dari 3

Nomor : UDDP-PDD-L3-003

Versi : 001

Tgl. berlaku : 14-11-2022

Tgl. kaji ulang : 14-11-2024

Pinset

Tempat pinset

Tempat kapas

Tempat kassa steril

Wadah limbah infeksius

6.2 Bahan Habis Pakai

Blood lancet

Capillary tube

Cuvette

Larutan CuSO_4 Bj 1.053

Larutan CuSO_4 Bj 1.062

Alkohol 70%

Kassa steril

Kapas swab

Botol limbah jarum

Plastik limbah infeksius

7. Prosedur

7.1 Lakukan dekontaminasi meja kerja menggunakan alkohol 70 % sebelum dan sesudah digunakan.

7.2 Siapkan peralatan dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan kadar hemoglobin darah donor sesuai check list peralatan dan bahan habis pakai seleksi donor

Larutan CuSO_4	Hb Meter
Lakukan validasi reagensia terhadap larutan CuSO_4 BJ 1.053 dan 1.062, sebelum digunakan dengan memeriksa masa kadaluarsa dan kejernihan larutan CuSO_4	Lakukan validasi alat Hb meter sebelum digunakan dengan memeriksa masa berlaku kalibrasi, <i>power supply</i> alat dan kebersihannya
Siapkan larutan CuSO_4 BJ 1.053 dan CuSO_4 BJ 1.062 di dalam <i>beaker glass</i> 30 mL. Larutan CuSO_4 BJ 1.053 digunakan untuk mendeteksi $\text{Hb} > 12,5 \text{ gr\%}$ sedangkan larutan CuSO_4 BJ 1.062 digunakan untuk mendeteksi $\text{Hb} > 17,0 \text{ gr\%}$.	Siapkan alat Hb meter 

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-003 Versi : 001 Tgl. berlaku : 14-11-2022 Tgl. kaji ulang : 14-11-2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

Desinfeksi ujung jari manis dengan kapas alkohol 70% menggunakan pinset.	
Tekan dekat posisi yang akan ditusuk, tusuk jari manis dengan posisi vertikal di jari, menggunakan <i>auto click</i> .	
Usap darah pertama dan kedua dengan kassa steril menggunakan pinset.	
Ambil darah donor menggunakan <i>capillary tube</i> sebanyak $\frac{3}{4}$ <i>capillary tube</i> untuk pemeriksaan Hb dengan Larutan CuSO ₄	Ambil darah menggunakan cuvet
Teteskan darah donor ke dalam larutan CuSO ₄ Bj 1.053 dan CuSO ₄ Bj 1.062.	-
Baca hasil pemeriksaan maksimal dalam waktu 15 detik dan catat hasilnya. Cara Pembacaan Hasil pemeriksaan Hb dengan larutan CuSO ₄ : <u>BJ 1.053</u> <u>BJ 1.062</u> Terapung < 12,5 gr% Terapung < 17,0 gr% Melayang = 12,5 gr% Melayang = 17,0 gr% Tenggelam > 12,5 gr% Tenggelam > 17,0 gr%	Baca hasil pemeriksaan di layar alat Hb Meter Hemoglobin memenuhi syarat 12,5 gr% - 17,0 gr%

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan
001	14 - 11 - 2022	PMK dan CPOB	Dokumen Baru

