


INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-003
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	18 NOVEMBER 2024
TANGGAL KAJI ULANG	:	18 NOVEMBER 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO : ☒

Disusun oleh: Pesta Desima Pardede, S.Kep Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 12 November 2024
Diperiksa oleh : Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 November 2024 DOKUMEN
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 November 2024 DOKUMEN TERKENDALI Salinan No : 01
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 18 November 2024

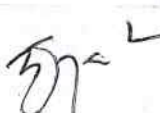

Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 1 dari 3
Nomor : UDDP-PDD-L3-003
Versi : 002
Tgl. berlaku : 18 Nov 2024
Tgl. kaji ulang: 18 Nov 2026

1. Tujuan

Instruksi kerja ini menjelaskan proses pemeriksaan kadar hemoglobin darah calon pendonor dengan metoda CuSO_4 (Cupri Sulfat) dan Hb meter.

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas seleksi donor pada saat pemeriksaan hemoglobin calon pendonor

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 7.31 Pemeriksaan Fisik, Kriteria Kesehatan Donor dan Keberterimaan Donor

Berdasarkan peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh ORN, pemeriksaan fisik dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah pengawasan dokter berizin. ORN, setelah berkonsultasi dengan UTD dan Pusat Plasmaferesis, hendaklah menetapkan kriteria kesehatan dan batas keberterimaan pada saat pemeriksaan fisik seperti pengukuran hemoglobin, tekanan darah, berat badan, usia, denyut nadi dan suhu atau kriteria lain yang dipertimbangkan untuk menjaga keamanan komponen darah atau donor.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa No 10 tahun 2018 Pedoman CPOB untuk unit penyedia darah

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1.1 Petugas Seleksi donor adalah petugas yang sudah terlatih melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin pendonor darah
- 5.1.2 CuSO_4 adalah larutan kimia yang digunakan untuk memeriksa hemoglobin secara sederhana
- 5.1.3 Hb Meter adalah alat untuk mengukur kadar hemoglobin pendonor darah

5.2 Singkatan

- 5.2.1 IK : Instruksi Kerja
- 5.2.2 CuSO_4 : Cupri Sulfat
- 5.2.3 Hb : Hemoglobin
- 5.2.4 PerKa : Peraturan Kepala
- 5.2.5 CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

6. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

6.1 Peralatan

Auto click
Beaker glass ukuran 30 ml
Hb meter
Tempat lancet

INSTRUKSI
PEMERIKSAAN

Capillary tube
Cuvette
Larutan CuSO₄ BJ 1.053
Larutan CuSO₄ BJ 1.062



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 2 dari 3
Nomor : UDDP-PDD-L3-003
Versi : 002
Tgl. berlaku : 18 Nov 2024
Tgl. kaji ulang: 18 Nov 2026

- Pinset
- Tempat pinset
- Tempat kapas
- Tempat kassa steril
- Wadah limbah infeksius

- 6.2 Bahan Habis Pakai
- Blood lancet
 - Capillary tube
 - Cuvette
 - Larutan CuSO₄ BJ 1.053
 - Larutan CuSO₄ BJ 1.062
 - Alkohol 70%
 - Kassa steril
 - Kapas swab
 - Botol limbah jarum
 - Plastik limbah infeksius

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

7. Prosedur

- 7.1 Lakukan dekontaminasi meja kerja menggunakan alkohol 70 % sebelum dan sesudah digunakan
- 7.2 Siapkan peralatan dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan kadar hemoglobin darah donor sesuai check list peralatan dan bahan habis pakai seleksi donor

Larutan CuSO ₄	Hb Meter
Lakukan validasi reagensia terhadap larutan CuSO ₄ BJ 1.053 dan 1.062, sebelum digunakan dengan memeriksa masa kadaluarsa dan kejernihan larutan CuSO ₄	Lakukan validasi alat Hb meter sebelum digunakan sesuai dengan Formulir Validasi Alat Hemocue No. Dokumen UDDP-PDD-L4-018. Periksa power supply alat dan kebersihannya
Siapkan larutan CuSO ₄ BJ 1.053 dan CuSO ₄ BJ 1.062 di dalam beaker glass 30 mL. Larutan CuSO ₄ BJ 1.053 digunakan untuk mendeteksi Hb > 12,5 gr% sedangkan larutan CuSO ₄ BJ 1.062 digunakan untuk mendeteksi Hb > 17,0 gr%.	Siapkan alat Hb meter
Desinfeksi ujung jari manis dengan kapas alkohol 70% menggunakan pinset.	



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**INSTRUKSI KERJA
PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN**

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 3 dari 3
Nomor : UDDP-PDD-L3-003
Versi : 002
Tgl. berlaku : 18 Nov 2024
Tgl. kaji ulang: 18 Nov 2026

Tekan dekat posisi yang akan ditusuk, tusuk jari manis dengan posisi vertikal di jari, menggunakan *auto click*.

Usap darah pertama dan kedua dengan kassa steril menggunakan pinset.

Ambil darah donor menggunakan *capillary tube* sebanyak $\frac{3}{4}$ *capillary tube* untuk pemeriksaan Hb dengan Larutan CuSO₄

Ambil darah menggunakan cuvet

Tetaskan darah donor ke dalam larutan CuSO₄ Bj 1.053 dan CuSO₄ Bj 1.062.

Masukkan Cuvet ke alat Hb Meter. Tunggu hingga keluar hasil pembacaan.

Baca hasil pemeriksaan maksimal dalam waktu 15 detik dan catat hasilnya.
Cara Pembacaan Hasil pemeriksaan Hb dengan larutan CuSO₄:

Baca hasil pemeriksaan di layar alat Hb Meter
Hemoglobin memenuhi syarat
12,5 gr% - 17,0 gr%

BJ 1.053

BJ 1.062

Terapung < 12,5 gr%

Terapung < 17,0 gr%

Melayang = 12,5 gr%

Melayang = 17,0 gr%

Tenggelam > 12,5 gr%

Tenggelam > 17,0 gr%

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan
001		PMK dan CPOB	Dokumen Baru
002			Penambahan nomer dokumen formulir validasi alat hemocue