



INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH A, B, O DAN RHESUS METODE PAPER SLIDE

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-004
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	14 NOVEMBER 2022
TANGGAL KAJI ULANG	:	14 NOVEMBER 2024
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO : ☐

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 08 November 2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 08 November 2022
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M,Biomedik Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 09 November 2022
Disahkan oleh: Dr.dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 10 November 2022

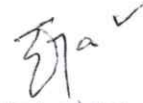

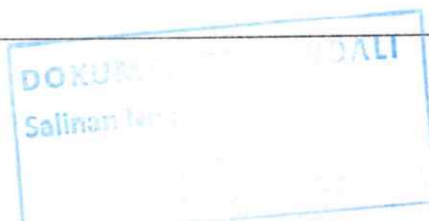

Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**INSTRUKSI KERJA
PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH
A, B, O DAN RHESUS
METODE PAPER SLIDE**

Halaman 1 dari 3

Nomor : UDDP-PDD-L3-004

Versi : 001

Tgl. berlaku : 14-11-2022

Tgl. kaji ulang : 14-11-2024

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

1. Tujuan

Instruksi kerja (IK) ini menjelaskan proses pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas seleksi donor pada saat pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus calon pendonor

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 7.31 Pemeriksaan Fisik, Kriteria Kesehatan Donor dan Keberterimaan Donor Berdasarkan peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh ORN, pemeriksaan fisik dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah pengawasan dokter berizin. ORN, setelah berkonsultasi dengan UTD dan Pusat Plasmaferesis, hendaklah menetapkan kriteria kesehatan dan batas keberterimaan pada saat pemeriksaan fisik seperti pengukuran hemoglobin, tekanan darah, berat badan, usia, denyut nadi dan suhu atau kriteria lain yang dipertimbangkan untuk menjaga keamanan komponen darah atau donor.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa No 10 tahun 2018 Pedoman CPOB untuk unit penyedia darah

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1.1 Petugas Seleksi donor adalah petugas yang sudah terlatih melakukan pemeriksaan golongan darah pendonor darah
- 5.1.2 ABO adalah jenis golongan darah pada sistem penggolongan A,B, AB dan O
- 5.1.3 Rhesus adalah jenis golongan darah pada sistem Rhesus

5.2 Singkatan

- 5.2.1 IK : Instruksi Kerja
- 5.2.2 PerKa : Peraturan Kepala
- 5.2.3 CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar





Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**INSTRUKSI KERJA
PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH
A, B, O DAN RHESUS
METODE *PAPER SLIDE***

Halaman 1 dari 3
Nomor : UDDP-PDD-L3-004
Versi : 001
Tgl. berlaku : 14-11-2022
Tgl. kaji ulang : 14-11-2024

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

6. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

6.1 Peralatan

Wadah limbah infeksius

6.2 Bahan Habis Pakai

Paper slide

Batang pengaduk

Botol limbah jarum

Plastik limbah infeksius

6.3 Reagensia

Test sera Anti-A

Test sera Anti-B

Test sera Anti-D

7. Prosedur

- 7.1 Lakukan dekontaminasi meja kerja menggunakan alkohol 70 % sebelum dan sesudah digunakan.
- 7.2 Siapkan peralatan, bahan habis pakai dan reagensia pemeriksaan golongan darah A, B, O dan Rhesus.
- 7.3 Lakukan validasi reagensia anti sera sebelum digunakan dengan memeriksa masa kadaluarsa dan kejernihan anti sera.
- 7.4 Siapkan reagensia dalam *cool box* berisi *ice pack* yang dilengkapi dengan termometer suhu sebagai kontrol suhu *cool box* yang tercatat dan ditukar dengan reagensia baru per tiga jam.
- 7.5 Ambil darah donor menggunakan *capillary tube* sebanyak $\frac{3}{4}$ *capillary tube*.
- 7.6 Teteskan satu tetes darah donor pada permukaan *paper slide* di tiga tempat yang tersedia dari kiri ke kanan berurutan untuk Anti-A, Anti-B, dan Anti-D.
- 7.7 Teteskan Anti-A, Anti-B dan Anti-D masing-masing dua tetes di atas tetesan darah donor.
- 7.8 Aduk dengan batang pengaduk masing- masing campuran darah donor dengan tes sera (1 batang pengaduk untuk satu campuran darah donor dengan tes sera) dan homogenkan.
- 7.9 Baca dan catat hasil pemeriksaan.
Pembacaan hasil :
Aglutinasi : ada antigen pada sel darah merah donor
Tidak Aglutinasi : tidak ada antigen pada sel darah merah donor

DOKUMEN TERKENDALI
Nomor :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH A, B, O DAN RHESUS METODE PAPER SLIDE		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-004 Versi : 001 Tgl. berlaku : 14-11-2022 Tgl. kaji ulang : 14-11-2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

7.10 Interpretasi Hasil

Anti - A	Anti - B	Golongan Darah	Anti - D	Rhesus
+	-	A	+	Positif
-	+	B	-	Negatif
-	-	O		
+	+	AB		

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan
001	14 – 11 - 2022	PMK dan CPOB	Dokumen Baru

