


INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN CONTACK SHOCK FREEZER

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-039
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	20 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER ☐ SALINAN NO : ☐

Disusun oleh : Nurihza Arum Adyatma, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 6 Januari 2025
Diperiksa oleh : Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Kepala Seksi Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  MASTER Tanggal : 10 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025
Disahkan oleh : dr. Sri Hartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 20 Januari 2025

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

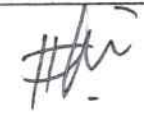

Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA
**PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
CONTACT SHOCK FREEZER**

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Penyediaan Darah

Palang Merah Indonesia

Nomor : UDDP-PDD-L3-039

Versi : 001

Tgl. berlaku : 20 Jan 2025

Tgl. kaji ulang : 20 Jan 2027

1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk bagi petugas pengolahan komponen darah untuk membersihkan dan mencegah kontaminasi pada alat serta petunjuk untuk cara penggunaan alat *Contact Shock Freezer*

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh seluruh teknisi pelayanan darah di UDD Palang Merah Indonesia dalam proses pengolahan komponen darah

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Semua peralatan dilakukan pembersihan serta desinfeksi yang direkomendasikan untuk semua permukaan yang bersentuhan langsung dengan sistem kantong darah.
- 3.2 *Contact Shock Freezer* hendaklah digunakan sesuai dengan prosedur penggunaan alat.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa No.10 tahun 2018 Pedoman CPOB untuk unit penyedia darah

5. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

5.1 Peralatan

5.1.1 *Contact Shock Freezer*

5.2 Bahan Habis Pakai

5.2.2 Tisu

5.2.3 Alkohol 70 %

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

6. Prosedur

6.1 Prosedur penggunaan Alat

- 6.1.1 Pastikan alat telah tersambung ke stop kontak
- 6.1.2 Geser tombol pojok kanan berwarna merah kuning ke posisi "ON"
- 6.1.3 Rapatkan *plate contact shock freezer* dengan cara menekan kedua tombol yang ada tanda panah menutup secara bersamaan hingga berbunyi "bip"
- 6.1.4 Geser tombol Tengah atas ke arah *freeze* atau beku
- 6.1.5 Tunggu hingga suhu mencapai yang diinginkan
- 6.1.6 Buka *plate contact shock freezer* dengan menekan tombol yang ada tanda panah ke atas
- 6.1.7 Masukkan produk plasma yang akan dibekukan sesuai instruksi kerja pengolahan komponen darah
- 6.1.8 Rapatkan kembali *plate contact shock freezer* dengan cara menekan kedua tombol yang ada tanda panah menutup secara bersamaan hingga berbunyi "bip"
- 6.1.9 Diamkan produk di dalam alat *contact shock freezer* selama 50 menit



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
CONTACT SHOCK FREEZER**

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Penyediaan Darah

Revisi 2 dari 2

Nomor : UDDP-PDD-L3-039

Versi : 001

Tgl. berlaku : 20 Jan 2025

Tgl. kaji ulang : 20 Jan 2027

6.1.10 Jika sudah selesai, tekan tombol "STOP"

6.1.11 Buka *plate contact shock freezer* dengan menekan tombol yang ada tanda panah ke atas.

6.1.12 Ambil produk komponen darah dan segera simpan pada *freezer*

6.1.13 Jika akan membekukan produk komponen Kembali, maka lakukan prosedur nomer 6.1.6 hingga 6.1.12.

6.1.14 Jika sudah selesai lakukan defrost dengan cara menggeser tombol tengah atas ke arah defrost (paling kiri)

6.1.15 Tunggu hingga proses defrost selesai

6.1.16 Lap menggunakan tisu kering pada bagian yang terdapat cairan dari bunga es hingga kering

6.1.17 Matikan alat dengan cara menggeser tombol ON/OFF ke posisi "OFF"

6.1.18 Catat kegiatan penggunaan alat pada formulir Pencatatan Penggunaan Alat UDDP-MK-L4-025

MASTER

6.2 Prosedur Pemeliharaan Alat

6.2.1 Persiapkan peralatan yang digunakan yaitu, tisu sebagai pembersih dan bahan penyerap

6.2.2 Pastikan alat diletakkan pada tempat yang datar

6.2.3 Pastikan jarak antara alat dengan dinding ± 20 cm

6.2.4 Periksa kerapatan busa pada *Plate Contact Shock Freezer*

6.2.5 Bersihkan dinding bagian dalam dengan larutan Alkohol 70 % setiap minggu atau bila terjadi tumpahan darah

Catat kegiatan perawatan pada formulir perawatan alat UDDP-MK-L4-024

7 Lampiran

7.1 Formulir Pemeliharaan Alat (UDDP-MK-L4-024)

7.2 Formulir Pencatatan Penggunaan Alat (UDDP-MK-L4-025)

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

8 Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	20 Januari 2025	PMK No. 91	Dokumen Baru