


INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN REFRIGERATED CENTRIFUGE SORVALL BP 16

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-040
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	20 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER ☐ SALINAN NO : ☐

Disusun oleh : Nurihza Arum Adyatma, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 6 Januari 2025
Diperiksa oleh : Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Kepala Seksi Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  MASTER Tanggal : 10 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  DOKUMEN TERKENDALI Salinan No : 01 Tanggal : 14 Januari 2025
Disahkan oleh : dr. Sri Hartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 20 Januari 2025

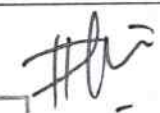

Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA
PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
REFRIGERATED CENTRIFUGE
SORVALL BP 16

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Penyediaan Darah

Halaman 1 dari 2

Nomor : UDDP-PDD-L3-040

Versi : 001

Tgl. berlaku : 20 Jan 2025

Tgl. kaji ulang : 20 Jan 2027

1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk bagi petugas pengolahan komponen darah untuk membersihkan dan mencegah kontaminasi pada alat serta petunjuk untuk cara penggunaan alat *Refrigerated Centrifuge* Sorvall BP 16

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh seluruh teknisi pelayanan darah di UDD Palang Merah Indonesia dalam proses pengolahan komponen darah

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Semua peralatan dilakukan pembersihan serta desinfeksi yang direkomendasikan untuk semua permukaan yang bersentuhan langsung dengan sistem kantong darah.
- 3.2 *Refrigerated Centrifuge* Sorvall BP 16 hendaklah digunakan sesuai dengan prosedur penggunaan alat.

MASTER

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa No.10 tahun 2018 Pedoman CPOB untuk unit penyedia darah

5. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

5.1 Peralatan

5.1.1 *Refrigerated Centrifuge* Sorvall BP 16

5.2 Bahan Habis Pakai

5.2.2 Tisu

5.2.3 Alkohol 70 %

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

6. Prosedur

6.1 Prosedur penggunaan Alat

- 6.1.1 Pastikan alat telah tersambung ke aliran listrik
- 6.1.2 Geser tuas kecil yg berada pada sisi samping kanan keatas
- 6.1.3 Tunggu hingga layar siap
- 6.1.4 Sentuh "Log In" pada layar
- 6.1.5 Pilih "Admin Log In" pada layar
- 6.1.6 Pilih "0000" pada User Pin lalu sentuh "Apply"
- 6.1.7 Pilih dan sentuh lambang panah terbuka keatas, biarkan *Refrigerated Centrifuge* terbuka secara otomatis
- 6.1.8 Masukkan Cup Centrifuge yang sudah terisi kantong darah sesuai dengan Instruksi Kerja Pengolahan Komponen Darah UDD-PDD-L3-019
- 6.1.9 Pilih dan sentuh lambang panah tertutup ke bawah, biarkan *Refrigerated Centrifuge* tertutup secara otomatis



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA
PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
REFRIGERATED CENTRIFUGE
SORVALL BP 16

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Penyediaan Darah

Halaman 4 dari 4

Nomor : UDDP-PDD-L3-040

Versi : 001

Tgl. berlaku : 20 Jan 2025

Tgl. kaji ulang : 20 Jan 2029

6.1.10 Pilih "Select Program"

6.1.11 Pilih program pemutaran sesuai yang dibutuhkan

6.1.12 Pilih "Load"

6.1.13 Sentuh pada bagian layar yang berwarna hijau

6.1.14 Tunggu hingga alat selesai proses pemutaran

6.1.15 Jika sudah selesai alat akan berbunyi untuk memberi tanda bahwa proses pemutaran sudah selesai

6.1.16 Pilih dan sentuh lambang panah terbuka keatas, biarkan tutup *Refrigerated Centrifuge* terbuka secara otomatis

6.1.17 Ambil darah dan perlakukan darah sesuai IK Pengolahan Komponen Darah UDD-PDD-L3-019

6.1.18 Jika sudah selesai matikan alat dengan cara geser tuas kecil yg berada pada sisi samping kanan ke bawah

6.1.19 Catat kegiatan penggunaan alat pada formulir Pencatatan Penggunaan Alat UDDP-MK-L4-025

MASTER

6.2 Prosedur Pemeliharaan Alat

6.2.1 Persiapkan peralatan yang digunakan yaitu, tisu sebagai pembersih dan bahan penyerap

6.2.2 Pastikan alat diletakkan pada tempat yang datar

6.2.3 Pastikan jarak antara alat dengan dinding ± 20 cm

6.2.4 Bersihkan dinding bagian dalam dan cup centrifuge dengan larutan Alkohol 70 % setiap setelah penggunaan atau bila terjadi tumpahan darah

6.2.5 Catat kegiatan perawatan pada formulir pemeliharaan alat UDDP-MK-L4-024

7 Lampiran

7.1 Formulir Pemeliharaan Alat (UDDP-MK-L4-024)

7.2 Instruksi Kerja Pengolahan Komponen Darah (UDD-PDD-L3-019)

7.3 Formulir Pencatatan Penggunaan Alat (UDDP-MK-L4-025)

DOKUMEN TERK

Salinan No: 01

8 Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	20 Januari 2025	PMK No. 91	Dokumen Baru