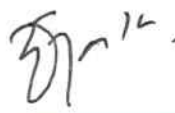


# INSTRUKSI KERJA PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN MEJA DINGIN

|                    |   |                                                                       |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| NO DOKUMEN         | : | UDDP-PDD-L3-043                                                       |
| VERSI              | : | 001                                                                   |
| TANGGAL BERLAKU    | : | 20 Januari 2025                                                       |
| TANGGAL KAJI ULANG | : | 20 Januari 2027                                                       |
| STATUS DOKUMEN     | : | MASTER <input type="checkbox"/> SALINAN NO : <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Disusun oleh :</p> <p style="text-align: center;">Nurihza Arum Adyatma, A.Md.Kes<br/>Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>    | <p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 6 Januari 2025</p>                                                                                                           |
| <p style="text-align: center;">Diperiksa oleh :</p> <p style="text-align: center;">Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes<br/>Kepala Seksi Penyediaan Darah<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>           | <p>Tanda tangan : </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">MASTER</div> <p>Tanggal : 10 Januari 2025</p> |
| <p style="text-align: center;">Disetujui oleh :</p> <p style="text-align: center;">dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed<br/>Kepala Bidang Pelayanan Darah<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p> | <p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 14 Januari 2025</p>                                                                                                        |
| <p style="text-align: center;">Disahkan oleh :</p> <p style="text-align: center;">dr. Sri Hartaty, M.Biomed<br/>Manajer Kualitas<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>                          | <p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 20 Januari 2025</p>                                                                                                        |

DOKUMEN TERKENDALI

|                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b><br><b>PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN</b><br><b>MEJA DINGIN</b> |                                | Halaman 1 dari 2<br>Nomor : UDDP-PDD-L3-043<br>Versi : 001<br>Tgl. berlaku : 20 Jan 2025<br>Tgl. kaji ulang : 20 Jan 2027 |
|                                                                                                                                                      | Bidang<br>Pelayanan Darah                                                         | Sub Bidang<br>Penyediaan Darah |                                                                                                                           |

## 1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk bagi petugas pengolahan komponen darah untuk membersihkan dan mencegah kontaminasi pada alat serta petunjuk untuk cara penggunaan dan pemeliharaan alat meja dingin

## 2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh seluruh teknisi pelayanan darah di UDD Palang Merah Indonesia dalam proses pengolahan komponen darah

## 3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Semua peralatan dilakukan pembersihan serta desinfeksi yang direkomendasikan untuk semua permukaan yang bersentuhan langsung dengan sistem kantong darah
- 3.2 Meja dingin hendaklah digunakan sesuai dengan prosedur penggunaan alat

## 4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa No.10 tahun 2018 Pedoman CPOB untuk unit penyedia darah

## 5. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

### 5.1 Peralatan

#### 5.1.1 Meja dingin

### 5.2 Bahan Habis Pakai

#### 5.2.1 Tisu

#### 5.2.2 Alkohol 70 %

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan No: 01

## 6. Prosedur

### 6.1 Prosedur penggunaan Alat

- 6.1.1 Pastikan alat sudah tersambung aliran Listrik
- 6.1.2 Tekan tombol "ON" pada tombol "ON/OFF" yang berwarna merah dan berbentuk kotak
- 6.1.3 Pastikan alat sudah menyala dan indikator suhu sudah terbaca
- 6.1.4 Letakkan darah atau komponen darah pada meja dingin saat proses pengolahan berlangsung sesuai kebutuhan
- 6.1.5 Tekan tombol "OFF" jika sudah selesai penggunaan
- 6.1.6 Catat kegiatan penggunaan alat pada formulir Pencatatan Penggunaan Alat UDDP-MK-L4-025

### 6.2 Prosedur Pemeliharaan Alat

- 6.2.1 Persiapkan peralatan yang digunakan, tisu tanpa serat sebagai pembersih dan bahan penyerap

|                                                                                                                                           |                                                                                   |                                |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br>Unit Donor Darah Pusat | <b>INSTRUKSI KERJA</b><br><b>PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN</b><br><b>MEJA DINGIN</b> |                                | Halaman 2 dari 2<br>Nomor : UDDP-PDD-L3-043<br>Versi : 001<br>Tgl. berlaku : 20 Jan 2025<br>Tgl. kaji ulang : 20 Jan 2027 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Pelayanan Darah                                                         | Sub Bidang<br>Penyediaan Darah |                                                                                                                           |

- 6.2.2 Pastikan Alat diletakkan pada tempat yang datar
- 6.2.3 Pastikan jarak antara alat dengan dinding  $\pm$  20 cm
- 6.2.4 Bersihkan tiap sisi meja dingin dengan larutan antiseptik setiap minggu atau bila terjadi tumpahan darah
- 6.2.5 Catat kegiatan perawatan pada formulir pemeliharaan alat UDDP-MK-L4-024

## 7 Lampiran

- 7.1 Formulir Pemeliharaan Alat (UDDP-MK-L4-024)
- 7.2 Formulir Pencatatan Penggunaan Alat (UDDP-MK-L4-025)

## 8 Riwayat Perubahan

| Nomor Versi | Tanggal Efektif | Referensi             | Ringkasan Perubahan |
|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 001         | 20 Januari 2025 | PMK No. 91 Tahun 2015 | Dokumen Baru        |

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan No : 01