

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX UKURAN SEDANG		Halaman : 1 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 001 Tanggal berlaku : 7 Mei 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

PROTOKOL VALIDASI

Nama UDD : Unit Donor Darah Pusat
Sub Bidang : Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah

No. Dokumen : UDDP-PDD-L3-071
Nama Peralatan : Cool Box Ukuran Sedang
No.seri :
Kode Uniq : Q-0117

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

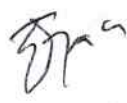
Disusun oleh:

Nama	Bidang	Tanggal	Tanda Tangan
Nurihza Arum Adyatma, A.Md.Kes	Pelayanan Darah	5 Mei 2025	

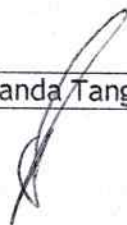
Diperiksa oleh:

Nama	Bidang	Tanggal	Tanda Tangan
Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes	Pelayanan Darah	5 Mei 2025	

Disetujui oleh:

Nama	Bidang	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed	Pelayanan Darah	6 Mei 2025	

Disahkan oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Srihartaty, M.Biomed	Manajemen Kualitas	7 Mei 2025	

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX UKURAN SEDANG		Halaman : 2 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 001 Tanggal berlaku : 7 Mei 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

1. Tujuan

Protokol kualifikasi ini merupakan petunjuk untuk melakukan pengepakan kantong darah dalam cool box agar suhu optimal darah dan komponen darah tetap stabil terjaga pada saat transportasi dan penyimpanan darah dan komponen darah.

2. Ruang Lingkup

Validasi mencakup verifikasi keadaan cool box, verifikasi suhu penyimpanan selama dalam cool box, dan penilaian mutu darah dan komponen darah yang disimpan dalam cool box.

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

3. Tanggung Jawab

Pelaksanaan validasi cool box dilakukan oleh tim yang terdiri dari:

- Perwakilan Tim pengguna yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan protokol, pelaksanaan dan pelaporan
- Perwakilan Tim MK yang bertanggung jawab dalam protokol, pelaksanaan dan pelaporan dan pemeriksaan mutu darah dan komponen darah yang digunakan saat validasi
- Perwakilan Tim Kalibrasi Alat yang bertanggung jawab dalam penyediaan alat dan pelaksanaan pencatatan suhu pada saat pelaksanaan

4. Referensi

Dokumen terkait:

1. SPO Pengemasan
2. SPO Pemeriksaan Uji Mutu Komponen

5. Kriteria Keberterimaan dan Parameter Pengujian

Validasi dapat diterima jika:

Deskripsi	Kriteria Keberterimaan	Hasil	Lulus/Tidak Lulus
Volume Cool Box	Berukuran 40 - 60 Liter		
Jumlah kantong darah yang dapat dibawa	Dapat membawa 25 - 50 PRC dari kantong donasi 350 mL dengan volume sekitar 200 mL		
Suhu simpan, suhu sekitar dan lama waktu penyimpanan	Dapat mempertahankan suhu optimal pada saat perjalanan pada suhu sekitar mencapai 20 - 30° C selama perjalanan sampai 5 jam		
Hasil uji mutu komponen	75% komponen sesuai dengan persyaratan		

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX UKURAN SEDANG		Halaman : 3 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 001 Tanggal berlaku : 7 Mei 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

6. Proses

- Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan.
- Lakukan pengemasan darah dan komponen darah dalam cool box sesuai dengan SPO Pengemasan.
- Lakukan proses transportasi.
- Catat suhu penyimpanan selama transportasi.
- Lakukan pemeriksaan uji mutu komponen
- Siapkan laporan validasi

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

7. Prosedur Pelaksanaan

- 1) Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk proses validasi:

Jenis Alat	Kondisi
Data Logger	Sudah dikalibrasi, lengkapi laporan validasi dengan laporan hasil kalibrasi, dan mempunyai daya simpan yang cukup
Kantong Darah PRC	Empat kantong darah PRC yang belum kedaluarsa untuk pemeriksaan uji mutu komponen 21 - 46 kantong PRC yang sudah kedaluarsa/ dummy bag/ PRC belum kedaluarsa untuk memenuhi cool box
Ice Pack	Dalam keadaan beku

- 2) Lakukan pengemasan kantong darah sesuai dengan SPO Pengemasan
- 3) Siapkan data logger agar dapat merekam suhu selama proses pengepakan sampai selesai transportasi dengan frekuensi pencatatan setiap 10 menit.
- 4) Nyalakan data logger
- 5) Masukkan data logger di antara kantong darah yang dimasukkan dalam cool box. Catat dalam form kegiatan validasi Cool Box Ukuran Sedang
- 6) Tutup Cool Box dan masukkan dalam mobil untuk transportasi di tempat yang terlindung dari sinar matahari
- 7) Bawa mobil berkeliling selama lima (5) jam dengan AC terus terpasang
- 8) Setelah selesai, ambil data logger
- 9) Empat kantong darah dikirimkan ke Manajer Kualitas untuk dilakukan pemeriksaan uji mutu komponen
- 10) Ambil data suhu dari data logger
- 11) Buat laporan validasi

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX UKURAN SEDANG		Halaman : 4 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 001 Tanggal berlaku : 7 Mei 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

8. Kesimpulan dan Langkah Perbaikan (bila perlu)

Bila hasil validasi tidak memenuhi syarat keberterimaan, buat laporan penyimpangan dan lakukan penilaian menggunakan referensi sebagai berikut:

No.	Referensi
1.	Laporan Validasi Cool Box Ukuran Sedang
2.	SPO Laporan Penyimpangan
3.	SPO Laporan Hasil Investigasi Sederhana
4.	SPO Usulan Perbaikan SPO (bila diperlukan)



9. Lampiran

Form Pencatatan Suhu Selama Validasi Cool Box

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PENCATATAN SUHU SELAMA VALIDASI COOL BOX		Halaman : 1 dari 2 Nomor : UDDP-PDD-L4-028 Versi : 001 Tgl berlaku : Tgl kaji ulang :
	Sub. Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

Tanggal Pelaksanaan:

Petugas Pelaksana:

Cool Box

Nama Cool Box:

Jenis Cool Box:

Ukuran Cool Box*: Besar/ Sedang/ Kecil

Volume Cool Box:

Data Logger

Nama Data Logger:

Jenis Data Logger:

Tanggal Kalibrasi:

Hasil Kalibrasi:

Sertifikat Kalibrasi*: terlampir/ tidak terlampir

Jam	Suhu	Keterangan

Jam	Suhu	Keterangan

Jam	Suhu	Keterangan

Jam	Suhu	Keterangan