

PROTOKOL KUALIFIKASI

TUBE SEALER CENTRON SE160


Nama UDD : Unit Donor Darah Pusat
Sub Bidang : Penyediaan Darah

No. Dokumen : UDDP-PDD-L3-073
Nama Peralatan : Tube Sealer
No.seri : 1620774
Kode Unik : Q-0517

Disusun oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes.	Pelayanan Darah	18 Agustus 2025	

Diperiksa oleh:

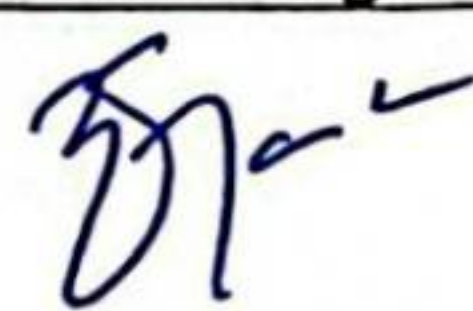Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed.	Pelayanan Darah	25 Agustus 2025	

Disetujui oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed.	Pelayanan Darah	25 Agustus 2025	

Disahkan oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Sri Hartaty, M.Biomed.	Manajemen Kualitas	29 Agustus 2025	


 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI TUBE SEALER CENTRON SE160		Halaman : 1 dari 8 Nomor : UDDP-PDD-L3-073 Versi : 001 Tanggal berlaku : 29 Agustus 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

**PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI
TUBE SEALER CENTRON SE160**

Spesifikasi Kebutuhan Pengguna: (Tersedia/ Tidak Tersedia)
Tujuan: Dokumen ini bertujuan untuk memastikan dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstal sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian, manual alat. Dan pemasangannya dilakukan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
Kualifikasi instalasi dilakukan pada waktu instalasi dan pemindahan lokasi alat.
Ruang Lingkup: Kualifikasi instalasi mencakup : • Verifikasi kebenaran instalasi komponen, instrument dan peralatan sesuai dengan spesifikasi • Verifikasi instalasi sarana penunjang dilakukan pada waktu instalasi, dan pemindahan lokasi • Verifikasi kebenaran material • Kelengkapan manual, spare part dan kebutuhan perawatan
Tanggung Jawab : - Personil yang bertanggung jawab pada instalasi peralatan melakukan kualifikasi dan melakukan pencatatan. - Petugas Teknik bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data dan laporan kualifikasi. - Manajer Kualitas bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui Protokol dan Laporan Kualifikasi Instalasi.
Sistem / Alat: Tube Sealer SE160 No. Seri : 1620774 a. Uraian tentang sistem/ alat yang sedang dipasang: uraian umum tentang fungsi dan komponen utama alat. Alat untuk melakukan seal selang dari kantong darah.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI TUBE SEALER CENTRON SE160		Halaman : 2 dari 8 Nomor : UDDP-PDD-L3-073 Versi : 001 Tanggal berlaku : 29 Agustus 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

b. Daftar komponen utama.

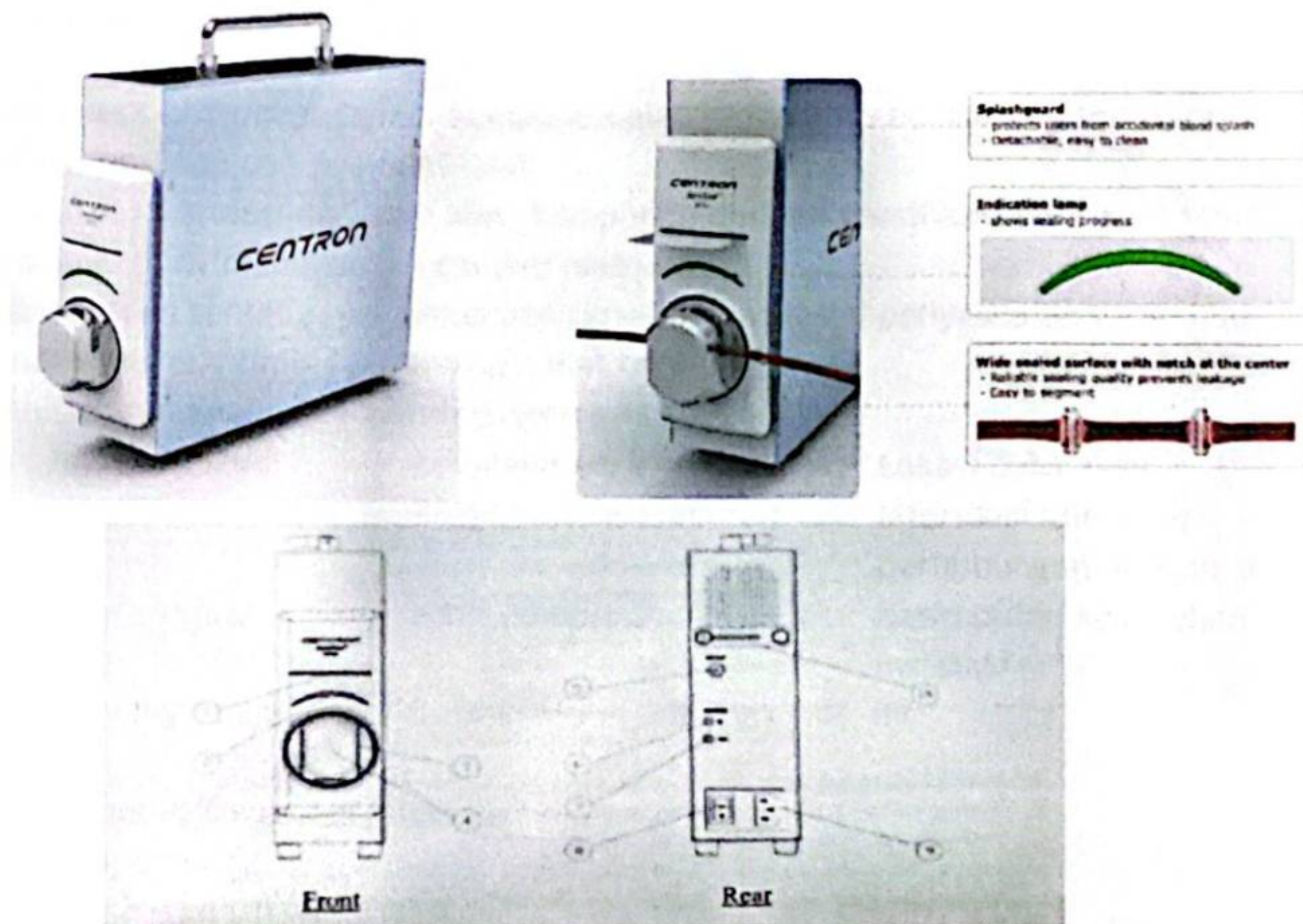

No.	Komponen
Nama Alat / Merk : Tube Sealer Centron SE160	
No.Seri 1620774	
Kapasitas : 1 kali seal saat pemakaian	
1.	Slot pelindung untuk percikan cairan
2.	Lampu indikasi
3.	Sealing Head
4.	Sealing Head Protetor
5.	RF Kabel Konektor
6.	Trigger on Connector
7.	Trigger out Connector
8.	Power Switch
9.	Power Cord Inlet
10.	Linkage bar

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI TUBE SEALER CENTRON SE160		Halaman : 3 dari 8 Nomor : UDDP-PDD-L3-073 Versi : 001 Tanggal berlaku : 29 Agustus 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

c. Uraian tentang peralatan tambahan yang diperlukan
 Membutuhkan Aliran listrik

Prosedur:

1. Siapkan *Check List* untuk semua komponen alat termasuk suku cadang sesuai dengan spesifikasi pesanan dan pembuat alat.
2. Catat semua informasi dari tiap alat, komponen dengan spesifikasi pabrik pembuat alat.
3. Catat semua penyimpangan sistem dan peralatan.
4. Siapkan laporan tentang penyimpangan tersebut termasuk penyesuaian yang dilakukan serta dampak yang timbul pada fungsi alat tersebut.
5. Siapkan laporan kualifikasi instalasi termasuk:
 - Tanggal mulai studi
 - Kelengkapan informasi
 - Lokasi data awal
 - Tanggal penyelesaian
 - Ringkasan dari laporan
 - Informasi lain yang berhubungan dengan studi
 - Pengamatan yang dilakukan
 - Hasil pemeriksaan
 - Kesimpulan keabsahan instalasi
 - Masalah yang timbul
 - Data contoh (jika ada)

Daftar Periksa untuk Komponen Alat

Fungsi dari komponen

- Tanggal Pelaksanaan Uji Kualifikasi :
- Lokasi : Lab. Pengolahan dan Penyimpanan Darah
- Sistem : Identitas, daya Listrik, komponen kritis dan syarat lingkungan
- Jenis kegiatan : Pengamatan

No.	Deskripsi	Kriteria Keberterimaan	Kondisi Aktual	Keterangan (sesuai/ tidak sesuai)
Persyaratan Lingkungan/ruangan				
1	Posisi penempatan	Jarak antara dinding dan alat lainnya ± 10		
2.	Suhu & Kelembaban	20 - 25°C & 50-80 %		
		Lokasi penempatan tidak terkena sinar matahari langsung		

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI TUBE SEALER CENTRON SE160		Halaman : 4 dari 8 Nomor : UDDP-PDD-L3-073 Versi : 001 Tanggal berlaku : 29 Agustus 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

Pemeriksaan Identitas alat :				
1	Model	Tersedia pada label alat		
2	No. Seri	Tersedia pada label alat		
Pemeriksaan Elektrik/daya listrik :				
1	Main voltage (V)	100-250VAC		
2	Cycles (Hz):	50/60Hz		
3	Amperage (A):	3 A		
	Phase:	1 phase		
Pemeriksaan Komponen				
1	Bentuk Fisik	Vertikal ke atas		
2	Control panel and keypad	Tersedia konektor untuk kabel listrik		
2	Mobilitas	Kaki penyeimbang disesuaikan dengan meja kerja		
4	Lapisan Luar dan dalam	Steinless steel		
9	Sakelar	Sakelar baterai dan sakelar daya tersedia		
Pemeriksaan Dokumen				
1.	Buku manual operasional	Tersedia oleh suplier		
2.	Sertifikat produk	Tersedia CE		
Penyimpangan hasil (sistem & peralatan)				
	Cek poin dan rekomendasi	Instalasi dilakukan sesuai dengan spesifikasi alat		
	Diperiksa Oleh :			
	Dicek oleh :			
2. Kesimpulan hasil :				

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI TUBE SEALER CENTRON SE160		Halaman : 5 dari 8 Nomor : UDDP-PDD-L3-073 Versi : 001 Tanggal berlaku : 29 Agustus 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

PROTOKOL KUALIFIKASI OPERASIONAL
TUBE SEALER CENTRON SE160

Tujuan Untuk menetapkan bahwa sistem atau peralatan beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan untuk mencatat semua data informasi yang dapat menunjang bahwa alat tersebut berfungsi sesuai dengan persyaratan
Ruang Lingkup Kualifikasi operasional mencakup : • Konsistensi (kemampuan) menseal selang pada kantong darah berfungsi dengan benar • System keamanan • Rentang operasional dan lain-lain. Kualifikasi operasional dilaksanakan setelah kualifikasi desain, kualifikasi instalasi.
Tanggung Jawab - Personil yang menggunakan alat/sistem melaksanakan kualifikasi operasional dan mencatat hasilnya. - Kepala Bagian/Seksi memeriksa dan mengawasi pelaksanaan studi, melakukan verifikasi kelengkapan catatan, membuat Laporan Penyimpangan dan Laporan Kualifikasi Operasional (KO). - Kepala bidang memeriksa dan menyetujui Protokol Kualifikasi Operasional (KO). - Manajer Kualitas melakukan penilaian ulang dan menyetujui Protokol dan Laporan.
Bahan Pasokan dan Dokumen - Daftar yang diperlukan - Selang kantong darah dari kantong yang digunakan - Bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kualifikasi operasional - Manual book - Laporan Pelatihan Operator - IK pemeliharaan alat

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI TUBE SEALER CENTRON SE160		Halaman : 6 dari 8 Nomor : UDDP-PDD-L3-073 Versi : 001 Tanggal berlaku : 29 Agustus 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

Catatan Laporan Penyimpangan: Penyimpangan: Penyesuaian yang dilakukan: Dampak terhadap operasi alat:
Dilaksanakan oleh: _____ Tanggal _____ Penyimpangan: _____ Diperiksa oleh: _____ Tanggal _____

Kesimpulan Hasil :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI TUBE SEALER CENTRON SE160		Halaman : 7 dari 8 Nomor : UDDP-PDD-L3-073 Versi : 001 Tanggal berlaku : 29 Agustus 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA
TUBE SEALER CENTRON SE160

1. Tujuan Untuk mengetahui kinerja dari performa alat yang diuji apakah sesuai dengan spesifikasi pengguna					
2. Uraian Sistem/ Peralatan Alat sealer selang kantong darah					
3. Kapasitas (mesin) 1 kali seal setiap penggunaan					
4. Sarana Penunjang Selang kantong darah					
5. Parameter Kritis Kebocoran pada selang saat di seal					
No	Nomor Selang	Segmen	Bocor	Tidak Bocor	Kesimpulan
1		1			
		2			
		3			
		4			
2		1			
		2			
		3			
		4			

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI TUBE SEALER CENTRON SE160		Halaman : 8 dari 8 Nomor : UDDP-PDD-L3-073 Versi : 001 Tanggal berlaku : 29 Agustus 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen Tahap Kualifikasi Sebelum KK:

Tahap	Kelengkapan Dokumen (tanggal)	Catatan
Spesifikasi kebutuhan pengguna	Ada	
Kualifikasi Instalasi (KI)	Ada	
Kualifikasi Operasional (KO)	Ada	
IK Pemeliharaan Tube sealer Centron SE160	Ada	

Kesimpulan hasil :