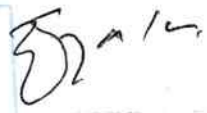


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONFIRMASI GOLONGAN DARAH

NO DOKUMEN	:	UDDP-SGD-L2-001
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	14 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	14 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 06 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 08 Januari 2025
Disetujui oleh : DOKUMEN TERKONTROL Salinan No: dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONFIRMASI GOLONGAN DARAH		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku: 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang: 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini digunakan sebagai petunjuk dalam proses kegiatan persiapan peralatan dan reagensia, merawat contoh darah, melakukan pemeriksaan Konfirmasi Golongan Darah (KGD) ABO dan *Rhesus*.

2. Ruang Lingkup

SPO ini akan digunakan oleh staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang untuk melakukan kegiatan persiapan peralatan dan reagensia, merawat contoh darah, pemeriksaan KGD ABO dan *Rhesus* serta skrining antibodi

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 2.15

Golongan darah ABO dan Rhesus harus diverifikasi pada setiap kantong darah yang didapat dan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan terdahulu

- 3.2 Sampel donor berupa darah lengkap, memiliki label berupa *barcode* dan tidak hemolisis
- 3.3 Setiap reagensia pemeriksaan harus divalidasi sebelum digunakan
- 3.4 Catatan hendaklah terbaca, akurat, terpercaya dan benar-benar merepresentasikan hasil dan data yang dimasukkan
- 3.5 Sampel untuk pemeriksaan konfirmasi golongan darah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 3.5.1 Sampel berupa darah lengkap/*whole blood* dalam tabung yang akan dipisahkan sebagai serum atau plasma
 - 3.5.2 Sampel ditampung dalam tabung vakum/tidak vakum yang berukuran 12x75 mm
 - 3.5.3 Tabung sampel terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan tutup dengan antikoagulan maupun tidak.
 - 3.5.4 Memiliki label berupa *barcode*/etiket yang berisi: tanggal pengambilan, nomor kantong darah dan tempat pengambilan
 - 3.5.5 Disertai formulir pengiriman sampel darah yang berisi: nomor urut, nomor kantong darah, tanggal pengambilan, asal sampel, diperiksa dan ditandatangani dengan jelas nama petugas pengirim dan petugas yang menerima sampel
 - 3.5.6 Sampel darah tidak boleh hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin
 - 3.5.7 Memiliki masa simpan maksimal kurang dari 3 hari pada suhu 2-6°C
 - 3.5.8 Volume spesimen minimal ± 3 mL
- 3.6 Peralatan untuk konfirmasi golongan darah harus memenuhi persyaratan berikut:
 - 3.6.1 Memiliki izin edar dari badan yang berwenang (Kemenkes)
 - 3.6.2 Telah Lulus evaluasi oleh salah satu badan berwenang (Kementerian Kesehatan, WHO, CE Marked, TGA Australia, PEI-Jerman, US-FDA dan UDDP)
 - 3.6.3 Memiliki dokumentasi kualifikasi dan validasi peralatan dari vendor
 - 3.6.4 Memiliki dokumentasi pemeliharaan peralatan secara rutin
 - 3.6.5 Telah dikalibrasi secara berkala dan masa kalibrasi masih berlaku
 - 3.6.6 Divalidasi sebelum digunakan

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONFIRMASI GOLONGAN DARAH		Halaman 2 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku: 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang: 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 3.7 Reagensia untuk konfirmasi golongan darah harus memenuhi persyaratan berikut:
- 3.7.1 Bahan dan reagen yang digunakan seharusnya hanya berasal dari pemasok yang telah disetujui
 - 3.7.2 Bahan dan reagen memenuhi persyaratan serta spesifikasi yang ditetapkan
 - 3.7.3 Bahan dan reagen tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan
 - 3.7.4 Memiliki izin edar dan telah dievaluasi dari badan yang berwenang (EU, CE *Marked*, ISO, Kemenkes, UDDP)
 - 3.7.5 Memiliki instruksi kerja/leaflet pada setiap reagensia dan kit tes (cek kesesuaian antara insert kit dengan reagen)
 - 3.7.6 Divalidasi sebelum digunakan
- 3.8 Jika terjadi ketidaksesuaian hasil, komponen darah dari penyumbangan tersebut harus dikarantina hingga ketidaksesuaian hasil telah diselidiki dan diperbaiki hingga tidak ada lagi keraguan.
- 3.9 Hasil pemeriksaan rhesus dengan metode *direct agglutination* yang negatif pada donor harus dilanjutkan ke pemeriksaan *indirect agglutination* (*indirect agglutination test*) untuk memastikan *weak D*.
- 3.10 Pendonor dengan *weak D* positif/DVI Varian/ Del harus dianggap sebagai rhesus positif

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 KGD adalah Konfirmasi Golongan Darah
- 5.2 SGD adalah Serologi Golongan Darah
- 5.3 Konfirmasi Golongan Darah salah satu tahap di dalam pengelolaan darah yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menentukan golongan darah
- 5.4 *D weak* adalah ...

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung jawab
Manajer Kualitas	• Melakukan kontrol dokumen • Memberikan nomor register pada formulir dan SPO • Memastikan bahwa inspeksi kegiatan dalam SPO ini termasuk audit internal reguler berjalan baik
Kepala Bidang Pelayanan Darah	• Membuat kebijakan tentang SPO Konfirmasi Golongan Darah • Mengevaluasi SPO Konfirmasi Golongan Darah setiap 2 tahun • Menjamin ketersediaan petugas, peralatan dan

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONFIRMASI GOLONGAN DARAH		Halaman 3 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku: 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang: 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

Peran	Tanggung jawab
	bahan habis pakai sesuai kebutuhan • Mengevaluasi kinerja petugas dan metode yang digunakan
Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang  	• Melaksanakan kebijakan tentang Konfirmasi Golongan Darah • Mengatur kecukupan petugas, peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan • Inspeksi secara <i>periodic</i> proses dan kinerja petugas • Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan yang bermasalah • Inspeksi secara <i>periodic</i> pencatatan dan pelaporan proses pemeriksaan Konfirmasi Golongan Darah
Staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang	• Melakukan persiapan peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan • Menjalankan proses pemeriksaan sesuai SPO • Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap hasil pemeriksaan • Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bahan habis pakai

7. Prosedur

7.1 Persiapan Lembar Pemeriksaan Validasi Reagensia

- 7.1.1 Gunakan alat pelindung diri (APD) ketika melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah
- 7.1.2 Lakukan validasi reagensia sesuai dengan instruksi kerja validasi reagensia SGD (UDDP-SGD-L3-001)
- 7.1.3 Pastikan kebutuhan bahan habis pakai cukup untuk pemeriksaan sampel
- 7.1.4 Pastikan setiap langkah pada pemeriksaan telah dicek oleh orang kedua
- 7.1.5 Catat semua jenis reagensia, jumlah, no lot, kedaluwarsa, tanggal pemeriksaan dan nama petugas yang memeriksa
- 7.1.6 Lakukan *check list* dan tuliskan hasil pemeriksaan pada lembar *Check List* dan Lembar Hasil Validasi Reagensia (UDDP-SGD-L4-002)
- 7.1.7 Periksa semua hasil pekerjaan dan pencatatan oleh orang kedua

7.2 Perawatan Contoh Darah

- 7.2.1 Pastikan identitas dalam formulir permintaan darah sesuai dengan sampel darah yang diterima
- 7.2.2 Pastikan volume sampel darah sesuai dengan persyaratan permintaan darah

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONFIRMASI GOLONGAN DARAH		Halaman 4 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku: 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang: 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 7.2.3 Dokumentasikan identitas sampel, tanggal penerimaan sampel dan nomor registrasi Rumah Sakit
- 7.2.4 Lakukan perawatan contoh darah sesuai dengan Instruksi Kerja (UDDP-SGD-L3-002)
- 7.3 Pemeriksaan Golongan Darah ABO dan Rhesus**
- 7.3.1 Biarkan reagensia pada suhu kamar sebelum digunakan
- 7.3.2 Siapkan peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus sesuai metode yang digunakan
- 7.3.3 Siapkan *check list* dan lembar kerja pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus sesuai metode yang digunakan
- 7.3.4 Catat tanggal penerimaan sampel, identitas sampel dan tanggal pemeriksaan
- 7.4 Metode BioPlate**
- 7.4.1 Lakukan pemeriksaan golongan darah metode *bioplate* sesuai dengan Instruksi Kerja (UDDP-SGD-L3-003)
- 7.4.2 Catat hasil pemeriksaan dan disaksikan oleh orang kedua
- 7.5 Metode Tabung**
- 7.5.1 Lakukan pemeriksaan golongan darah metode tabung sesuai dengan Instruksi Kerja (UDDP-SGD-L3-004)
- 7.5.2 Catat hasil pemeriksaan dan disaksikan oleh orang kedua
- 7.6 Metode Otomatis Qwalys**
- 7.6.1 Lakukan pemeriksaan golongan darah dan skrining antibodi metode otomatis Qwalys sesuai dengan instruksi kerja (UDDP-SGD-L3-005)
- 7.6.2 Cek hasil pemeriksaan dan disaksikan oleh orang kedua
- 7.6.3 Transfer data hasil pemeriksaan ke SIMDONDAR
- 7.7 Lakukan pemeriksaan *D Weak* jika didapatkan hasil negatif pada darah donor sesuai dengan IK Pemeriksaan *D Weak* (UDDP-SGD-L3-007)
- 7.8 Lakukan perubahan data pemeriksaan golongan darah jika terjadi perbedaan golongan darah antara seleksi donor dengan konfirmasi golongan darah sesuai dengan IK Perubahan Data Golongan Darah pada Pemeriksaan Konfirmasi Golongan Darah (UDDP-SGD-L3-006)
- 7.7 Distribusi Hasil Pemeriksaan**
- 7.7.1 *Print out* hasil pemeriksaan golongan darah, Rhesus dan skrining antibodi sebanyak 2 (dua) salinan
- 7.7.2 Isi data pada Formulir Hasil Pemeriksaan KGD dan skrining antibodi sesuai Form (UDDP-SGD-L4-001) dan *print* sebanyak 2 salinan
- 7.7.3 Serahkan *Print out* hasil pemeriksaan dan formulir hasil pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi ke bagian penyediaan darah untuk ditandatangani dan disahkan
- 7.7.4 Serahkan 1 (satu) salinan *print out* hasil pemeriksaan dan 1 salinan formulir hasil pemeriksaan ke bagian penyediaan darah
- 7.7.5 Simpan salinan lainnya sebagai arsip

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KONFIRMASI GOLONGAN DARAH		Halaman 5 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku: 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang: 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

7.8 Pengarsipan sampel

- 7.8.1 Masukkan sampel darah kedalam *blood bank* suhu 2-6°C selama 5 hari, untuk sampel darah yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, tempatkan pada *box/rak* tersendiri dengan diberi identitas.
- 7.8.2 Sampel kedaluwarsa dimasukkan pada kantong limbah (infeksius) berwarna kuning untuk dimusnahkan.

8. Dokumen Terkait

- | | |
|--|-------------------|
| 8.1 Instruksi Kerja Validasi Reagensia | (UDDP-SGD-L3-001) |
| 8.2 Instruksi Kerja Perawatan Contoh Darah | (UDDP-SGD-L3-002) |
| 8.3 Instruksi Kerja Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus Metode Bioplat | (UDDP-SGD-L3-003) |
| 8.4 Instruksi Kerja Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus Metode Tabung | (UDDP-SGD-L3-004) |
| 8.5 Instruksi Kerja Pemeriksaan Golongan Darah dan Skrining Antibodi Metode Otomatis <i>Qwalys</i> | (UDDP-SGD-L3-005) |
| 8.6 IK Pemeriksaan D <i>Weak</i> | (UDDP-SGD-L3-007) |
| 8.7 IK Perubahan Data Golongan Darah pada Pemeriksaan Konfirmasi Golongan Darah | (UDDP-SGD-L3-006) |

9. Lampiran

- 9.1 Formulir Hasil Pemeriksaan Konfirmasi Golongan Darah dan Skrining Antibodi (UDDP-SGD-L4-001)
- 9.2 *Check list* pemeriksaan validasi reagensia (UDDP-SGD-L4-002)

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan Perubahan
001	01/12/2022		Dokumen baru
002	14/01/2025	PerKa BPOM No.10 Tahun 2017 dan PMK 91 Tahun 2015	- Struktur Organisasi UDD dan Referensi - Prosedur - Persyaratan Sistem Mutu - Perubahan nomor dokumen (Instruksi Kerja, formulir dan ceklis)