


INSTRUKSI KERJA PERAWATAN CONTOH DARAH

NO DOKUMEN	:	UDDP-SGD-L3-002
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	14 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	14 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes Staf Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 06 Januari 2025
Diperiksa oleh: Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si Kasub. Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 08 Januari 2025
Disetujui oleh: dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 13 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 14 Januari 2025

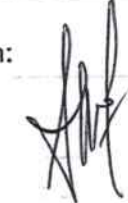

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PERAWATAN CONTOH DARAH		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-SGD-L3-002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kajiulang : 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	

1. Tujuan

Instruksi kerja (IK) ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam melakukan perawatan contoh darah meliputi pemisahan serum/plasma dan sel darah merah, pencucian sel darah merah, serta pembuatan suspensi dengan kepekatan tertentu sehingga didapatkan sampel atau contoh darah yang siap digunakan dalam pemeriksaan konfirmasi golongan darah.

2. Ruang Lingkup

IK ini akan digunakan oleh petugas atau staff Rujukan dan Litbang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan perawatan contoh darah. Perawatan contoh darah yang dimaksud meliputi pemisahan serum/plasma dan sel darah merah, pencucian sel darah merah, serta pembuatan suspensi dengan kepekatan tertentu.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Sampel pasien/donor berupa darah lengkap 3 mL, memiliki identitas dan tidak hemolisis.
- 3.2 Simpan sampel pada suhu 2 °C - 6 °C apabila belum akan dilakukan pemeriksaan, dan biarkan pada suhu kamar apabila pemeriksaan konfirmasi golongan darah akan dilaksanakan
- 3.3 Suspensi sel darah merah yang digunakan dalam pemeriksaan golongan darah yaitu:
 - 3.3.1 Suspensi 5% digunakan untuk metode tabung
 - 3.3.2 Suspensi 10% digunakan untuk ABO metode slide test
 - 3.3.3 Suspensi 40% digunakan untuk Rhesus metode slide test

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 SDM : Sel Darah Merah



 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PERAWATAN CONTOH DARAH		Halaman 2 dari 3 Nomor : UDDP-SGD-L3-002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kajiulang : 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	

6. Peralatan dan Bahan

6.1 Alat

- 6.1.1 Rak Tabung
- 6.1.2 Mikropipet/pipet plastic
- 6.1.3 *Centrifuge*
- 6.1.4 Tabung reaksi

6.2 Bahan

- 6.2.1 *Saline 0,9%*
- 6.2.2 Parafilm
- 6.2.3 Kantong limbah kuning/*biohazard*

7. Prosedur Pemeriksaan

7.1 Pemisahan Serum/Plasma dari Sel Darah Merah

- 7.1.1 Siapkan contoh darah dalam tabung yang sudah diberi identitas
- 7.1.2 Sentrifugasi darah dalam tabung dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 menit
- 7.1.3 Siapkan 1 tabung baru untuk menampung plasma dan beri identitas
- 7.1.4 Pisahkan plasma/serum sebanyak-banyaknya, masukkan ke dalam tabung yang sudah disiapkan. Sel darah merah pekat dan plasma

7.2 Pencucian Sel Darah Merah Pekat

- 7.2.1 Ambil 8 tetes SDM pekat, masukkan ke dalam tabung ukuran 12x75 mm
- 7.2.2 Tambahkan saline 0.9% sebanyak + 4,5 mL ke dalam tabung
- 7.2.3 Tutup tabung dengan parafilm, kocok perlahan sampai homogen
- 7.2.4 Sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 menit
- 7.2.5 Buka penutup parafilm, buang supernatan dengan menggunakan pipet (pencucian ke-1)
- 7.2.6 Ulangi langkah ke-2 sampai ke-5 sesuai dengan kebutuhan

7.3 Pembuatan Suspensi Sel Darah Merah

Buat suspensi SDM yang sudah dicuci menggunakan saline sesuai kebutuhan dengan perbandingan berikut:

- 7.3.1 Suspensi 5% : 1 tetes SDM + 19 tetes *saline*
- 7.3.2 Suspensi 10% : 1 tetes SDM + 9 tetes *saline*
- 7.3.3 Suspensi 40% : 2 tetes SDM + 3 tetes *saline*

DOKUMEN TERKENDALI

Salah satu dari

TER

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PERAWATAN CONTOH DARAH		Halaman 3 dari 3 Nomor : UDDP-SGD-L3-002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kajiulang : 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	01/12/2022		Dokumen Baru
002	14/01/2025	PMK No.91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah	Perubahan pada tujuan, ruang lingkup, persyaratan sistem mutu dan struktur organisasi

