

SPO PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI

NO DOKUMEN	:	UDDP-BBFP-L2-001
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Juni 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	20 Juni 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Wahyono, S. Pd Kasie. Penerimaan, Penyimpanan dan Pengiriman UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 16 Juni 2025
Diperiksa oleh: MASTER Arfat Lusinanto, S. Si, M. Biomed Kasubid. Bahan Baku fraksionasi Plasma UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 17 Juni 2025
Disetujui oleh: Salinan No : 01 dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kabid. Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 18 Juni 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan:  Tanggal: 20 Juni 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 2 dari 11 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam Pengemasan dan Transportasi Plasma untuk pengiriman Plasma Fraksionasi (PuF) ke Fraksionator yang telah ditunjuk oleh pemerintah

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan Pengemasan dan Transportasi Plasma untuk Fraksionasi (PuF) di lingkungan UDD

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1. Plasma yang dikirim ke pusat pengumpul plasma adalah plasma yang didonasikan minimal 1 bulan sebelum pengiriman
- 3.2. Plasma telah diuji saring memberikan hasil non reaktif dengan pemeriksaan EIA dan NAT
- 3.3. Plasma disimpan dalam suhu -20°C atau lebih rendah
- 3.4. Jika terdapat penyimpangan suhu selama penyimpanan di UDD, maka penyimpangan tersebut harus dilaporkan ke UDD Pusat
- 3.5. PMK 4/2023, Pasal 19
UDD harus melakukan pengumpulan, penjaminan mutu dan keamanan, dan pengiriman plasma yang memenuhi syarat ke fasilitas Fraksionasi Plasma
- 3.6. PMK 4/2023, Pasal 27
Fasilitas Fraksionasi Plasma melakukan pencatatan terhadap:
 - 3.2.1. Penerimaan dan penggunaan plasma;
 - 3.2.2. Pengiriman plasma;
 - 3.2.3. Realisasi produksi Produk Obat Derivat Plasma;
 - 3.2.4. Pemusnahan sisa fraksi plasma dan sisa plasma; dan
 - 3.2.5. Distribusi Produk Obat Derivat Plasma hasil produksi.
- 3.7. Perka BPOM 10/2017, Butir 1.5
Persyaratan dasar CPOB adalah sebagai berikut:
Seluruh sumber daya tersedia, termasuk personil yang terqualifikasi dan terlatih, bangunan dan fasilitas yang memadai, peralatan yang sesuai, bahan yang sesuai, prosedur dan instruksi yang disetujui, penyimpanan dan pengiriman yang sesuai
- 3.8. Perka BPOM 10/2017, Butir 3.1
Semua prosedur kritis seperti pembelian dan penerimaan bahan awal, pemilihan donor, pengambilan darah, persiapan komponen darah, pengujian laboratorium dan pengujian pengawasan mutu terkait, pelabelan produk, penyimpanan, pelulusan, pengiriman, pengangkutan, penarikan dan pemusnahan produk hendaklah diuraikan secara rinci dalam SPO sesuai dengan prinsip CPOB dan peraturan Pemerintah yang relevan
- 3.9. Perka BPOM 10/2017, Butir 4.22
Penyimpanan sementara dan pengiriman hendaklah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ditetapkan untuk memastikan spesifikasi dipenuhi
- 3.10. Perka BPOM 10/2017, Butir 7.194

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No: 01

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 3 dari 11 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

Sebelum didistribusikan, terhadap komponen darah hendaklah dilakukan pemeriksaan secara visual. Hendaklah tersedia catatan yang dapat mengidentifikasi personil yang mendistribusikan dan pelanggan yang menerima komponen. Pengiriman komponen darah hendaklah dilakukan oleh personil yang berwenang

3.11. Perka BPOM 10/2017, Butir 1.195

Pada saat pengiriman, hendaklah tersedia prosedur untuk memastikan bahwa seluruh komponen darah yang dikeluarkan telah diluluskan dengan resmi untuk digunakan

3.12. Perka BPOM 10/2017, Butir 1.197

Distribusi hendaklah dilakukan secara aman dan dikendalikan untuk memastikan mutu produk selama transportasi. Seluruh kegiatan transportasi dan penyimpanan antara, termasuk penerimaan dan distribusi, hendaklah dijelaskan dengan SPO dan spesifikasi

3.13. Perka BPOM 10/2017, Butir 7.198

Wadah pengiriman hendaklah menggunakan konstruksi yang kuat untuk mencegah kerusakan dan divalidasi untuk menjaga kondisi penyimpanan yang diterima untuk darah dan komponen darah (misal menggunakan elemen pendingin yang cukup atau isolasi selama transportasi)

3.14. Perka BPOM 10/2017, Butir 7.199

Transportasi dan kondisi penyimpanan komponen darah, susunan/pola pengepakan dan tanggung jawab personil yang terlibat hendaklah sesuai dengan SPO yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma
- 4.2 Perka BPOM No.10 tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plamsaaferesis

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1.1 Pengepakan Plasma adalah proses mengemas plasma sebelum proses pengiriman plasma untuk melindungi plasma dan menjaganya sesuai dengan standar pengelolaan rantai dingin darah
- 5.1.2 Transportasi Plasma adalah proses pemindahan/pengiriman plasma dari UDD ke tempat penyimpanan plasma sebelum dikirim ke fraksionator melalui pihak ketiga yang telah disetujui dan kompeten dalam pengiriman plasma darah

5.2 Singkatan

- 5.2.1 SPO : Standar Prosedur Operasional
- 5.2.2 PuF : Plasma untuk Fraksionasi

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 4 dari 11 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

- 5.2.3 PMK : Peraturan Menteri Kesehatan
 5.2.4 Perka : Peraturan Kepala
 5.2.5 BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan
 5.2.6 CPOB : Cara Pembuatan Obat yang Baik

6 Peran dan TanggungJawab

Peran	Tanggungjawab
Manajer Kualitas	- Mengesahkan dokumen SPO Pengemasan dan Transportasi Plasma untuk Fraksionasi - Memberikan nomor kontrol dokumen - Mengawasi proses pengemasan dan transportasi - Menyimpan dokumen SPO Pengemasan dan Transportasi Plasma untuk Fraksionasi yang asli dan membuat salinan yang akan didistribusikan kepada bagian yang terdapat dalam daftar distribusi dokumen - Mengisi dan menandatangani Certificate of Quality (CoQ) pada pengiriman - Menandatangani formulir serah terima barang
Tim pengambilan plasma	- Memasukkan kardus untuk pendinginan - Melakukan pengambilan plasma pada <i>freezer room</i> - Memasukkan kardus plasma yang telah dikemas sementara sebelum di muat ke truk
Tim Scanning	Melakukan <i>scanning</i> label barcode pada kantong darah untuk di input ke SIMDONDAR
Tim Pengemasan	- Melakukan pengemasan dan transportasi plasma secara aman dengan menjaga rantai dingin plasma sesuai standar - Menyiapkan donor list yang akan disertakan pada pengiriman
Tim muat barang	Melakukan pengangkutan dan pemuatan kardus plasma ke truk transporter
Tim IT	- Mendampingi dan mengawasi penginputan data kantong plasma untuk PuF - Melakukan perbaikan pada sistem jika terjadi masalah pada proses input data, cetak label dan kebutuhan kelengkapan dokumen dari sistem SIMDONDAR
Petugas Pencatat Waktu (<i>time keeper</i>)	- Mengawasi proses pengemasan dan transportasi sesuai dengan waktu standar - Mencatat waktu pemrosesan pengemasan dan transportasi pada formulir yang tersedia

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 5 dari 11 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

7 Peralatan dan Bahan

7.1. Peralatan

- 7.1.1 *Freezer Room* (rentang suhu: -20 ~ -40 °C)
- 7.1.2. Alat bantu pengepakan:
 - a. *Cold Room* (rentang suhu: +2 ~ +6 °C)
 - b. *Chest Freezer* dua pintu (rentang suhu: -20 ~ -40 °C)
 - c. Meja dingin
- 7.1.2 *Data Logger* (rentang suhu: -50 ~ +50 °C)
- 7.1.3 Komputer set dengan sistem SIMDONDAR untuk PuF
- 7.1.4 *Scanner*
- 7.1.5 *Printer barcode*
- 7.1.6 *Ice Pack* dengan ukuran: p.10,8 x l.13,3 x t.2,1 cm
- 7.1.7 Spidol besar permanen (7,5mm)
- 7.1.8 *Cold box*
- 7.1.9 *Timer*
- 7.1.10 *Thermogun* (suhu: -20°C ke bawah)

7.2. Bahan

- 7.2.1 Kardus dengan ukuran: p.56 x l.27 x t.17 cm
- 7.2.2 *Bubble wrap* dengan ukuran: p.70 x l.70 cm
- 7.2.3 *Bubble wrap* dengan ukuran: p.56 x l.27 cm (penutup permukaan tumpukan plasma)
- 7.2.4 Kertas *barcode* untuk label sampel dan kardus sesuai spesifikasi sistem SIMDONDAR
- 7.2.5 *Ribbon Print Barcode*
- 7.2.6 Selotip bening ukuran sedang (24mm-1 inch-lebar 2cm)
- 7.2.7 Lakban kain (benang rayon) merk Daimaru dengan ukuran: 48mm x 5 meter (2 inch)
- 7.2.8 Tali plastik rafia

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No: 01

8 Prosedur

- 8.1. Untuk mempermudah proses penginputan, masukkan data PuF dalam Input Stok Produk untuk Fraksionasi SIMDONDAR versi 3.7 setelah pelaksanaan pelulusan produk. Lihat IK Input Stok Produk PuF (no.dok: UDDP-BBFP-L3-001)
- 8.2. Memastikan bahwa data untuk PuF yang memenuhi syarat telah terinput dalam SIMDONDAR versi 3.7
- 8.3. Kelompokkan plasma sesuai kategori FFP 350 mL, FFP 450 mL, FP24 350 mL, FP24 450 mL, FP72 350 mL, FP72 450 mL atau FFP afereresis
- 8.4. Atur plasma pada rak freezer sesuai dengan kapasitas kardus:
- 8.5. Kantong 350 mL: 40 kantong
- 8.6. Kantong 450 mL: 32 kantong
- 8.7. Kantong apheresis: 32 kantong

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 6 dari 11 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

- 8.8. Lakukan pengkondisian kardus dan data logger. Lihat IK Pengkondisian kardus dan data logger (no.dok: UDDP-BBFP-L3-002)
- 8.9. Keluarkan plasma dari freezer dengan memperhatikan rantai dingin darah. Jika plasma diletakkan pada suhu ruangan (20-24°C), pastikan waktu yang diperlukan untuk proses tidak lebih dari lima menit
- 8.10. Lakukan scan kantong plasma satu persatu ke SIMDONDAR v.3.7 sesuai dengan jumlah kantong yang dapat dikemas dalam kardus. Prioritaskan plasma dengan tanggal kadaluarsa lebih pendek terlebih dahulu dan volume yang lebih besar. Lihat IK Input Kantong Plasma untuk Pengiriman dan Cetak Label Kardus (no.dok: UDDP-BBFP-L3-003)
- 8.11. Print label QR kardus dan barcode kantong. Lihat IK Input Kantong Plasma untuk Pengiriman dan Cetak Label Kardus (no.dok: UDDP-BBFP-L3-003)
- 8.12. Bawa plasma dan hasil print ke tempat pengepakan dengan memperhatikan rantai dingin darah. Jika plasma diletakkan pada suhu ruangan (20-24°C), pastikan waktu yang diperlukan untuk proses tidak lebih dari lima menit
- 8.13. Lakukan pengepakan plasma dalam kardus. Lihat IK Pengepakan Plasma untuk PuF dalam *chest Freezer* (no.dok: UDDP-BBFP-L3-004) dan IK Pengepakan Plasma untuk PuF dalam *cold room* (no.dok: UDDP-BBFP-L3-005)
- 8.14. Letakkan data logger yang telah disiapkan pada kardus yang telah ditetapkan. Lihat IK Peletakkan Data Logger (no.dok: UDDP-BBFP-L3-006)
- 8.15. Tutup kardus dengan lakban
- 8.16. Pasang label pada kardus sesuai ketentuan. Lihat IK Penempelan Label kardus (no.dok: UDDP-BBFP-L3-007)
- 8.17. Simpan kardus berisi plasma ke dalam freezer selama menunggu pemuatan ke dalam truk
- 8.18. Pastikan suhu dalam freezer truk pengangkutan telah mencapai suhu minimal -25°C sebelum proses pemuatan kardus. Lihat IK Pemuatan Kardus ke Truk (no.dok: UDDP-BBFP-L3-008)
- 8.19. Lakukan pemuatan kardus ke dalam truk. Lihat IK Pemuatan Kardus ke Truk (no.dok: UDDP-BBFP-L3-008)
- 8.20. Lakukan serah terima barang dengan petugas transporter menggunakan formulir yang dikeluarkan oleh pihak transporter
- 8.21. Laporkan hasil pengepakan dan pengiriman plasma

9 Lampiran

- 9.1. Formulir pencatatan suhu dan waktu pengepakan dan transportasi plasma

10 Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal pelaksanaan	Referensi	Riwayat Perubahan
001	20 Juni 2025	PMK No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma	Dokumen Baru

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 7 dari 11 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

Lampiran:

1. Formulir pencatatan suhu dan waktu pengepakan dan transportasi plasma

Tanggal Pengiriman:

Pengepakan Plasma	Petugas	Suhu tercapai saat proses pengkondisian	Jam Mulai pengepakan	Jam selesai pengepakan	Jam masuk Data Logger	Suhu Chest Freezer	Suhu plasma (menggunakan Thermogun)	Suhu Freezer	
								Saat kardus masuk	Saat kardus keluar
Kardus 1				MASTER					
Kardus 2									
Kardus 3									
Kardus 4									
dst									

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01



Bidang
Pelayanan
Darah

Halaman 8 dari 11

Nomor : UDDP-BBFP-L2-001

Versi : 001

Tanggal berlaku : 20 Juni 2025

Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027

Lampiran:

2. Donor List

Nama UDD :

Alamat :

Tanggal Pengiriman :

Tipe Produk :

Total Unit :

Total Mililiter :

Salkın No: 01

[illegible]

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 9 dari 11 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

Lampiran:

3. Quality Certificate of Analysis Recovered Plasma

UDD PMI.....

Alamat.....

Nomor UDD:.....

Quality Certificate of Analysis Recovered Plasma Sertifikat Mutu Hasil Analisis *Recovered Plasma*

Blood Center Name Nama UDD			
Street Address Alamat			
City, State, ZIP Nama, Kota, Kode Pos			
Phone # Nomor Telepon		Fax # Nomor Fax	

To: Kepada: (check appropriate box)/ (beri tanda cek pada kotak yang bersangkutan)

Unit Donor Darah Pusat Palang Merah Indonesia Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Indonesia, 12610	☐
SK Plasma Co., Ltd, 310, Pangyo-ro, Bundang Gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Republic of Korea	☐

SK Plasma Co., Ltd, 310, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Republic of Korea

Please be advised that we are shipping the following: (check appropriate box)
Bersama ini kami kirimkan: (beri tanda cek pada kotak yang bersangkutan)

"Fresh Frozen Plasma (FFP)" – Frozen within 6 Hours, Shipped at -20°C or colder "Fresh Frozen Plasma (FFP)" – Dibekukan dalam waktu 6 jam, Dikirimkan pada suhu -20°C atau dibawahnya	☐
"Fresh Frozen Plasma (FFP)" – Frozen within 8 Hours, Shipped at -20°C or colder "Fresh Frozen Plasma (FFP)" – Dibekukan dalam waktu 8 jam, Dikirimkan pada suhu -20°C atau dibawahnya	☐
"Frozen Plasma (FP)" – Frozen within 24 Hours, Shipped at -20°C or colder "Fresh Frozen Plasma (FFP)" – Dibekukan dalam waktu 24 jam, Dikirimkan pada suhu -20°C atau dibawahnya	☐


 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 10 dari 11 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

"Frozen Plasma (FP)" – Frozen within 72 Hours, Shipped at -20°C or colder "Fresh Frozen Plasma (FFP)" – Dibekukan dalam waktu 72 jam, Dikirimkan pada suhu -20°C atau dibawahnya	☐
---	--------------------------

eASN Shipment #		Bill of Lading #	
-----------------	--	------------------	--

The shipment contains:

Liters of Plasma		
Volume Plasma (Liter)		
# of Cartons		
Jumlah Kardus		
# of Plasma Units		
Jumlah Kantong Plasma		
Collection Dates	From:	To:

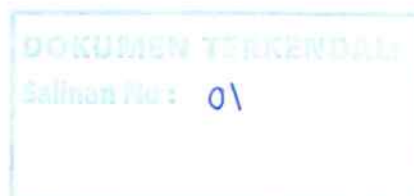

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 11 dari 11 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

UDD PMI.....

Alamat.....

Nomor UDD:.....

Bleed Dates Tanggal donasi	From: Dari :	To: Sampai.....
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Screening Test Parameter	Name of Test Kit Nama Reagen yang digunakan	Manufacturer Nama Pabrik Reagen
HBsAg		
Anti-HIV		
Anti-HCV		
HCV RNA		
HIV RNA		
HBV DNA		
Anti-Syphilis		

Plasma Bag (type / manufacturer) Kantong yang digunakan (Jenis/Nama Pabrik)	
Anti-coagulant (nature / composition) Antikoagulan	

It is certified that all units in this shipment have been tested and found non-reactive for HCV RNA, HIV RNA, HBV DNA, HBsAg, and for antibodies to HIV and HCV in the tests listed above. In addition, all units have been tested negative in the serological test for syphilis (STS) listed above.

Form ini merupakan informasi bahwa semua kantong plasma yang dikirimkan pada pengiriman ini sudah dilakukan pemeriksaan dan memberikan hasil non reaktif terhadap HCV RNA, HIV RNA, HBV DNA, HBsAg dan antibody untuk HIV dan HCV menggunakan reagen yang tertulis dalam data. Sebafei tambahan, semua kantong juga memberikan hasil non reaktif terhadap pemeriksaan sifilis. Sifilis menggunakan reagen tertulis dalam data.

This testing was completed by [Testing laboratory name], [Testing laboratory address] (BPOM GMP Certificate Number : NNNNNNNN).
 Pemeriksaan dilakukan oleh UDD PMI.....(Nomor Kode UDD:.....)

It is confirmed that the relevant and legal Quality Requirements are met.
 Dapat dikonfirmasi bahwa semua persyaratan kualitas yang relevan dan legal sudah terpenuhi

Signature of Responsible Person Tanda Tangan Penanggungjawab Manajer Kualitas (.....)	Date Tanggal
---	------------------------