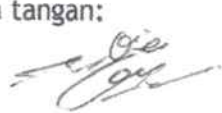
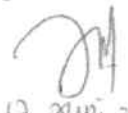
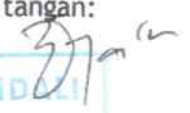


INSTRUKSI KERJA PEMUATAN KARDUS KE TRUK

NO DOKUMEN	:	UDDP-BBFP-L3-008
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Juni 2025
TANGGAL REVIEW	:	20 Juni 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Wahyono, S. Pd Kasie. Penerimaan, Penyimpanan dan Pengiriman UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 16 Juni 2025
Diperiksa oleh: Arfat Lusianto, S. Si, M. Biomed Kasubid. Bahan Baku fraksionasi Plasma UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 17 Juni 2025
Disetujui oleh: dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kabid. Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 18 Juni 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan:  Tanggal: 20 Juni 2025

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No: 01

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PEMUATAN KARDUS KE TRUK		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-BBFP-L3-008 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

1. Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pemuatan kardus ke truk untuk pengiriman Plasma Fraksionasi (PuF) ke Fraksionator yang telah ditunjuk oleh pemerintah

2. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini digunakan oleh satu atau lebih tim pemuatan yang terdiri dari dua orang petugas pemuatan barang per empat tumpuk kardus yang terikat menjadi satu ikatan, dan satu orang *time keeper* sebagai pencatat waktu, dengan perbandingan maksimal tiga tim berbanding satu orang *time keeper*

3. Prosedur yang terkait

Standar Prosedur Operasional pengepakan dan transportasi plasma untuk transportasi

4. Referensi

- 3.1. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma
- 3.2. Perka BPOM No.10 tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaaferesis

5. Peralatan

- 4.1. *Timer*

6. Bahan

- 5.1. Kardus yang telah terisi PuF
- 5.2. Tali plastic (rafia)

7. Instruksi Kerja

- 6.1. Pastikan suhu truk telah mencapai -25°C
- 6.2. Pastikan petugas penyusun kardus dari truk transporter telah memakai APD
- 6.3. Keluarkan satu persatu kardus dari ruang penyimpanan (*freezer/freezer room*)
- 6.4. Catat waktu saat kardus keluar dari ruang penyimpanan (*freezer/freezer room*)
- 6.5. Tumpuk kardus sebanyak empat kardus
- 6.6. Siapkan tali plastik ($\pm 2,5$ meter)
- 6.7. Ikat ke empat kardus pada empat sisi dari bagian kardus. Buat simpul dibagian puntiran
- 6.8. Foto atau video setiap ikat kardus plasma yang akan dimuat ke dalam truk untuk bukti jika kardus dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke truk transporter
- 6.9. Pindahkan kardus secara hati-hati menuju ke area pemuatan barang (*loading*) menggunakan troli secara hati-hati
- 6.10. Buka pintu pendingin truk

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PEMUATAN KARDUS KE TRUK		Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-BBFP-L3-008 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027

- 6.11. Petugas penyusun barang masuk ke truk sebelum proses memasukkan kardus ke truk
- 6.12. Masukkan secara berurutan kardus yang telah diikat sebelumnya ke dalam truk secara cepat. Pastikan waktu muat tidak lebih dari 45 detik untuk 12 kardus (tiga ikat kardus)
- 6.13. Pastikan pintu truk tidak terbuka lebar saat memasukkan kardus
- 6.14. Pastikan suhu truk tidak boleh lebih dari -20°C . Jika suhu truk melebihi batas -21°C, segera tutup pintu truk
- 6.15. Catat suhu truk saat pintu truk ditutup
- 6.16. Salah satu petugas pemuatan harus menjaga diluar truk. Jika terdengar alarm, segera buka pintu truk untuk mengeluarkan petugas penyusun barang
- 6.17. Biarkan truk hingga suhunya stabil pada -25°C sebelum memuat kardus berikutnya

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	20 Juni 2025	PMK No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma	Dokumen baru

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No : 01


 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PEMUATAN KARDUS KE TRUK		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-BBFP-L3-008 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027

Lampiran

1. Konfigurasi pengikatan kardus



2. Proses pemuatan kardus ke dalam truk

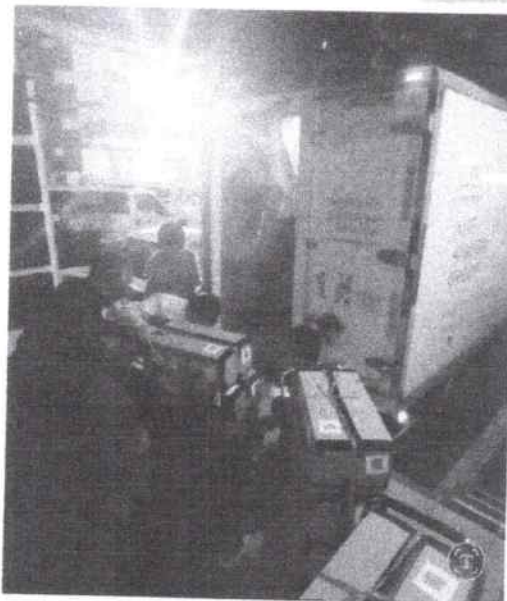

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No : 01